

按摩椅

型号:LR-C1000L

使用说明书

使用前

- 安全注意事项 02
- 安置按摩椅 06
- 使用前 08
- 产品结构 12

使用方法

- 操作说明 17

检修及保养方法

- 清洗及保养 22
- 故障检修 23
- 产品规格 24

使用目的及效果

代替人手按摩
一般家庭使用

- 感谢您购买本公司的按摩椅。
- 使用之前，请详细阅读使用说明书，正确使用。
- 使用之前，请务必阅读《安全注意事项》。
- 阅读完毕，请务必放置于随时可以取阅处，妥善保管。
- 包装使用的纸箱，请分类丢弃以利于资源回收利用。

安全注意事项

- 使用之前，请详细阅读使用说明书，正确使用。
- 此处所示注意事项，旨在安全正确使用本产品，防止使用者和他人受到危害或损害。
- 表示及内容，如下所示。
- 均是与安全有关的内容，请务必遵守。

 警告	若使用有误，推测可能导致使用者受较大的伤害及危害的程度。
 注意	若使用有误，推测可能导致使用者受伤、物品损害。

*所谓物品受到损害，是指涉及与房屋、家庭财产及家畜、宠物有关的损害。

	⊘ 符号表示禁止。 (左图为禁止拆卸)
	● 符号表示强制(必须遵守)。 (左图为从电源插座拔下电源插头)

- 阅读完本说明书后，请务必放置于随时可以取阅处，妥善保管。
- 丢弃机身及其附属品时，请遵从当地政府条例或规定处理。详情请咨询当地政府机关。

 警告	
	本产品的温热装置安装在内部，温热启动后，表面会开始发热，对温度不敏感的人，使用时请注意。以下用户也需特别注意。 ● 老年人、病人、不能自己操作的人 ● 服用嗜睡药物者 ● 血液循环不畅（糖尿病等）者 ● 皮肤的温感(温度感知)较弱的用户 ● 饮酒过量・极度疲劳者 ● 受到医生警告者 可能引起低温烫伤及脱水等症状。
	下列人士，使用前请咨询医生。 ● 使用心脏起搏器等体内植入易受电磁波影响的医用电子仪器者 ● 罹患恶性肿瘤者 ● 罹患心脏疾病者 ● 孕妇或产妇 ● 糖尿病等所致严重末梢血液循环不畅的感觉障碍者 ● 皮肤受损者 ● 需要静养者 ● 丧失温度感知者 ● 体温38℃以上（发烧期）者 （例：急性炎症症状 [倦怠感、发冷、血压变动等]强烈时。虚弱时。） ● 骨质疏松症者、脊椎骨折者、扭伤・肌肉拉伤等急性[疼痛性]疾病者 ● 背骨（脊椎）异常者或脊椎侧弯者 ● 腰椎间盘突出症者 ● 患有肌腱炎的用户 ● 身体感觉异常时或正在医疗机关治疗者

安全注意事项



警告



不能运行或出现异常时，请立即拔下电源插头，联络商家或本公司的客户咨询窗口进行检查・修理。

以免触电或漏电・短路等引发火灾。

按摩颈部周围时，请注意按摩球的动作。另外，请勿过度强力按摩颈部前方。
以免导致事故或受伤。

座椅躺放或调节脚部角度时，一定要确认周围（机身后方、前方、旁边、下方等）是否有人或物品。

以免导致事故、受伤或家庭财产的损失。

座椅躺放或调节脚部角度时，一定不要把手、手指、脚或头放入下列这些机身的缝隙中。

- 椅子下方 ● 靠背与座椅、扶手之间的缝隙 ● 脚部与座椅、扶手之间的缝隙
- 脚部下方、脚部后面 ● 手腕与扶手之间的缝隙 ● 靠背后方的缝隙

以免导致事故或受伤。

使用前，请掀起背垫，确认靠背的椅套是否破损。另外也请确认其他部分是否破损。（即使有很小的破损也要立即停止使用、拔下电源插头、委托修理。）

如果在椅套破损的状态下使用，可能导致触电或受伤。



严禁长时间使用温热功能。并严禁长时间按摩同一部位。

以免导致低温烫伤。

即使比较低的温度（40～60℃），长时间接触皮肤的同一部位，也可能导致低温烫伤。

关于低温烫伤

- 低温烫伤以皮肤深处形成红斑点或水泡为特征。
- 万一，形成了红斑点或水泡，请立即前往专业医生处就诊。

下列人士，严禁使用。可能导致身体异常。

被医生禁止接受按摩者

（例：血栓[栓塞]症、重度动脉（瘤）、急性静脉（瘤）、各种皮肤炎及皮肤感染症（包括皮下组织炎症）等）

严禁故意拆下、弄破、剪下机身（靠背部分、脚部）的套子。

在拆下椅套的状态下使用的话，可能导致衣服或头发卷进去而受伤。

严禁使用交流电100-240V以外的电源。可能导致火灾或触电。

严禁使用破损的电线或电源插头。

以免导致触电、短路或火灾。破损时，联络商家或本公司的客户咨询窗口进行检查・修理。

确保电源插头完全插入插座，并保持清洁。

以免导致触电或短路・火灾。

严禁孩子或不能表达自己意愿者使用。并严禁幼儿靠近。

以免导致触电或受伤。

严禁孩子在椅子上玩耍、坐在上面。 可能导致故障或受伤。

严禁用湿手拔电源。以免导致触电。

安全注意事项



警告



不要在浴室等潮湿场所使用、放置。
以免导致触电・火灾・发霉・生锈。



绝对不要改装。另外，也不可自行拆卸、修理。
以免导致火灾、运行异常、受伤等。



注意



每天使用时间控制在30分钟之内。此外，同一部位连续使用的时间控制在5分钟之内。
长时间使用会导致肌肉或神经疼痛。

即使身体健康，若属于下列范围者，也务必咨询医生后再使用。

- 由于年龄增长而肌肉衰弱者或身体消瘦者
- 易碰伤或扭伤者
- 严重晕车晕船者
- 因骨骼或内脏所致腰痛者
- 以往曾接受过心脏或内脏手术不注意会导致健康损害者。

若使用本品导致发疹、发红、发痒等症状时，应停止使用，并及时就医。
以免导致事故或身体不适。

使用后，请关闭电源，从电源插座上拔下电源插头。
以免因儿童玩耍而导致事故。

按摩椅应置于水平地面使用。以免导致故障或事故。

使用前应确认操作开关及计时功能等是否正常运作。
以免导致事故或受伤。

长时间未使用时，再次使用前，应再重新仔细阅读一遍说明书，然后再确认按摩椅
是否正常运作。以免导致事故或受伤。

使用前，请确认机身（靠背部分、脚部）是否夹杂异物。
以免导致事故或受伤。

使用时如感身体异常，请及时停止使用并就医。
以免不注意导致事故或身体不舒服。

确认按摩球处于收纳位置后，再缓慢入座。以免导致事故或受伤。

如果电源软线损坏，必须用从制造商或其服务机构处获取的专用软线或专用组件
来更换。



停电时立即把电源开关置于“OFF”处，从电源插座上拔下电源插头。
以免再通电时导致事故。

拔下电源插头时，应握住前端的电源插头，勿牵拉电源线。
以免导致触电或短路而引发火灾。

不使用时，应从电源插座上拔下电源插头。
以免灰尘或湿气导致绝缘老化，引发漏电火灾。

检修时，务必从电源插座上拔下电源插头。以免导致触电或受伤。

安全注意事项



注意



勿使用以下方式可能导致电源线或电源插头破损。

- 勿弄坏
- 勿使其破损
- 勿加工
- 勿过度弯曲、硬拉。
- 勿拧
- 勿打结
- 勿放置重物
- 勿挤夹。

以免导致触电、火灾或故障。

饮食后或饮酒后勿立即使用。 以免导致不舒服、事故或受伤。

勿靠近暖炉或烟火，吸烟时也严禁使用。另外，也严禁在电热毯等取暖设备上使用。以免导致火灾。

勿乘坐于靠背部分、脚部、肩部、扶手或站在座位上。

使用者或机身倾倒的话，可能会导致事故或受伤。

座椅躺放时，勿乘坐于按摩椅的脚部、座椅的前方以及靠背上方。

使用者或机身倾倒的话，可能会导致事故或受伤。

座椅躺放或抬高按摩器的脚部时，勿强行下来。

使用者或机身倾倒的话，可能会导致事故或受伤。

勿使用本按摩椅以外的附件。以免导致故障。

按摩时，勿配戴耳钉·耳环·项链·围巾等装饰品。 以免导致受伤。

头部勿配戴发饰等硬物。 以免导致受伤。

按摩腰部·臀部·大腿部时，衣服（裤子）的口袋里有硬物时请勿使用。以免导致事故或受伤。

勿直接接触皮肤使用。 直接按摩于皮肤可能会导致皮肤疼痛。

勿用于肘部、膝部、头部及腹部。 勿将手脚夹在按摩球之间。以免导致身体不适或受伤。

不可用脚底按摩滚轮按摩脚指。有受伤的可能性。

按摩中勿拔下电源插头、关闭电源。 以免导致受伤。

使用时请勿入睡。 无意识使用可能会导致身体不适或受伤。

勿载人或载物移动按摩椅。 以免导致故障或受伤。

勿2人以上同时坐在按摩椅上。 以免导致故障或受伤。

勿使用汽油、稀释剂、酒精等药品擦拭。 以免导致触电·着火。

勿用于按摩以外的目的。 以免导致故障或事故。

勿与其他治疗器同时使用。 以免导致事故或身体不适。

地板、木质等容易损坏的地面上，请勿拖拽、用脚轮移动按摩椅。以免损坏地面。

勿使机身倾倒或受到强烈撞击。 以免导致故障或受伤。


请勿使用高音量聆听。 长时间以高音量聆听，可能会损害您的听力。

安置按摩椅

安装位置

确保足够空间以便按摩椅可以倾斜，按摩椅后端距墙 30cm 以上。


请勿将按摩椅暴露于阳光直射或高温环境下(如：加热设备前)，安放位置避免高温与阳光直射，长期在指定位置使用建议铺设软垫，平铺垫子时，垫子的大小应足以盖住本机接触地板的范围与脚部接触地板的范围。

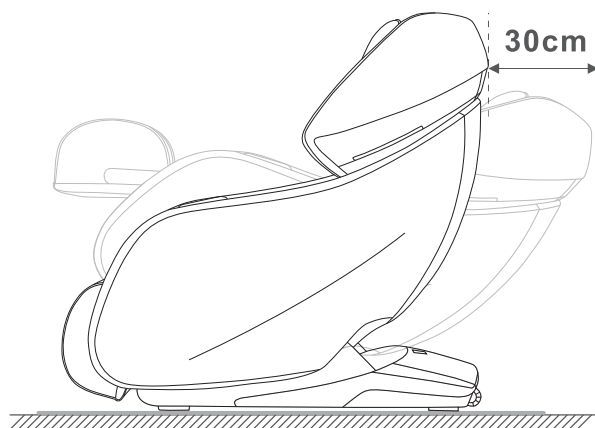

产品移动说明

托住座架底部两侧，然后抬起并移动。由于本机较重，因此搬运时请小心，以免造成背部拉伤。(本机必须由两人或多人搬运)

- 1、在木地板等易损的地面上请抬起按摩椅进行移动。
- 2、在类似木质地板上移动时，建议抬起方式。避免脚轮损伤地板抬起移动到指定位置放下时，注意手中避让以免损伤，小心脚部被压伤。直到本机完全放平前，请勿放开本机，地板可能受损，因此，建议在地板上铺上垫子等物品。

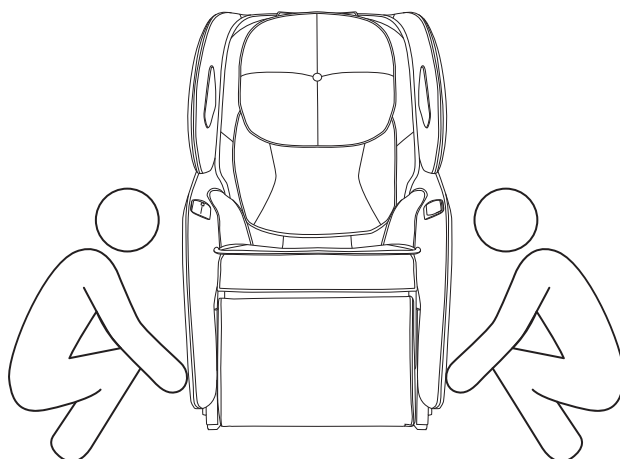

安置按摩椅


移动方法

使用后脚轮移动按摩椅。按图示方式, 将椅子向下后方倾倒约45° 进行移动。

注意: 下压幅度请勿太大, 避免椅子完全倾倒导致产品损坏。




- 1、移动前需正确关机,使靠背与小腿机构完全复位后解除产品供电。
- 2、移动时产品上需空置,勿使人员、宠物或杂物停留在本产品上。
- 3、使用脚轮移动切勿跨越高于2mm落差障碍或大于5mm间隙。
- 4、使用脚轮移动本品时,不支持单次连续使移动,超过50米距离,请使本品缓慢匀速移动。

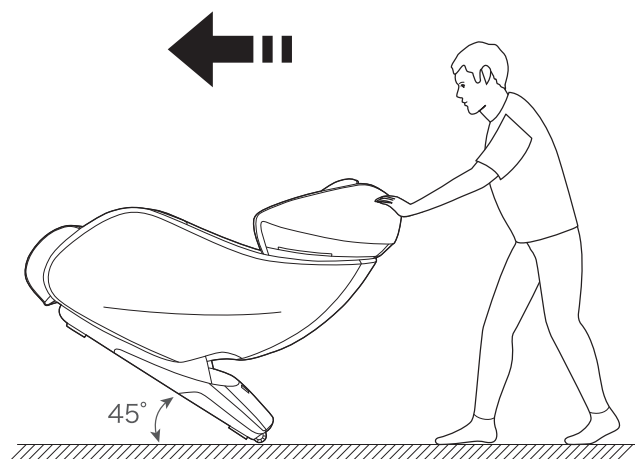

检查周围

确保本机周围没有人、宠物及其他物体。

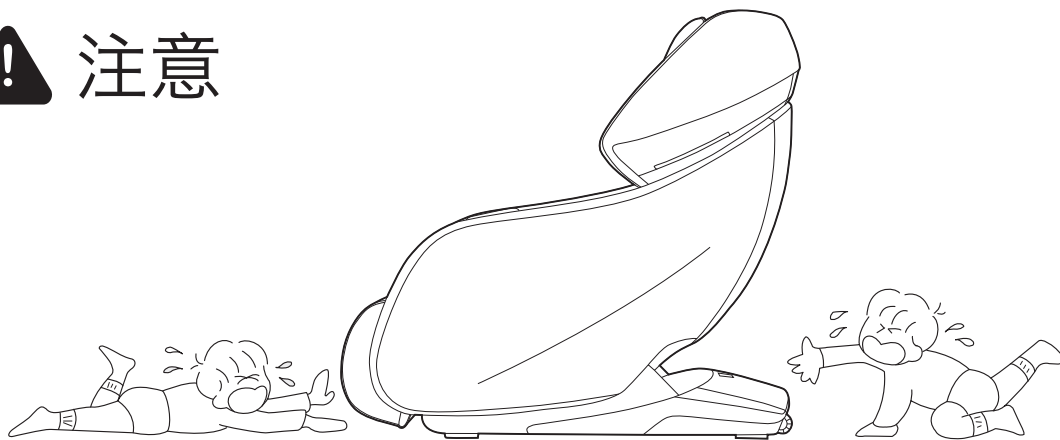


防夹安全1：警示标识

确保本机缝隙间没有异物


按摩前请确认小腿、脚部等位置没有夹住异物。任何情况下勿使手、脚、头伸入小腿机构与机体之间区域,和扶手与太空舱之间区域。

任何情况下勿使手、脚、头陷入按摩区织物或皮革覆盖面之后。

椅子的小腿运动部位,后盖运动部位,贴有防夹警示标志。

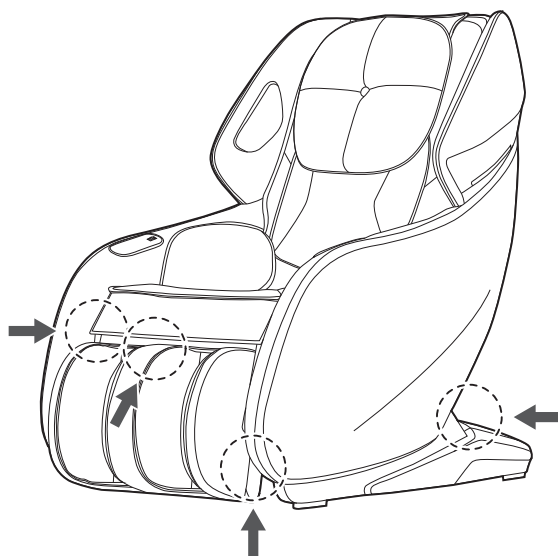

因小腿可翻转，翻转时，小心夹手

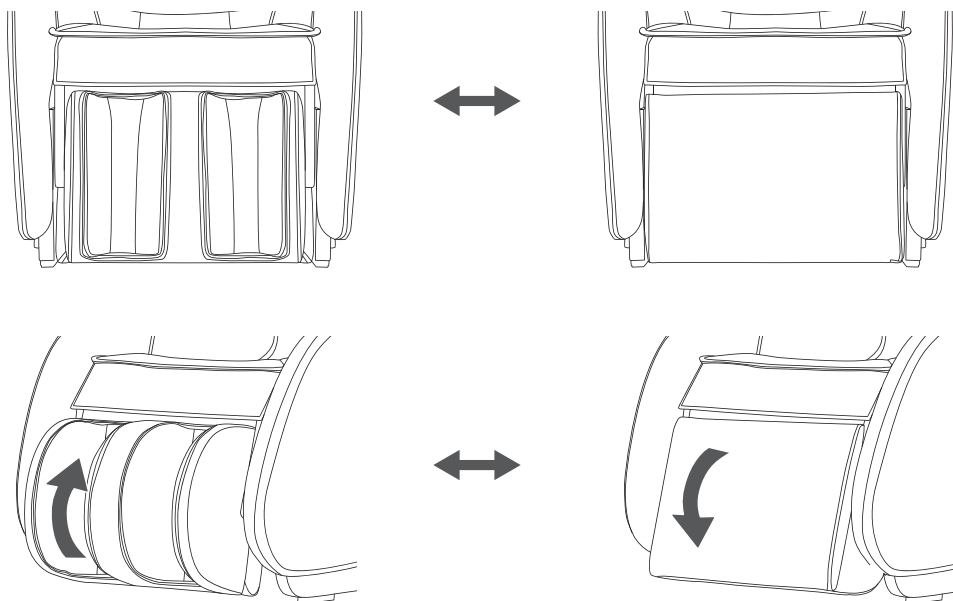


防夹安全2：自动防夹功能

防夹感应说明

本机的背部下方具有防夹功能, 在倒背/直立动作进行中, 异物触碰防夹感应区, 防夹功能触发并进入暂停模式。

将异物从背部下方移除, 按下暂停按钮恢复倒背/直立动作。


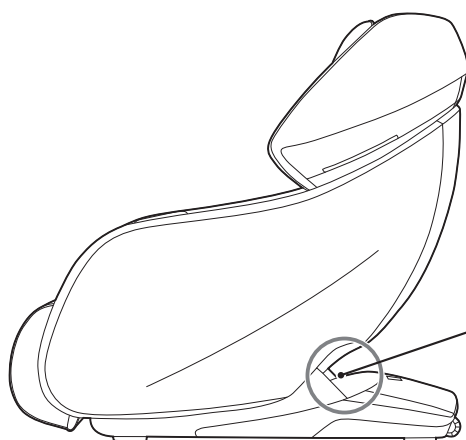


内置防夹感应条


防夹感应位置
后盖和下盖之间

使用前

小腿说明

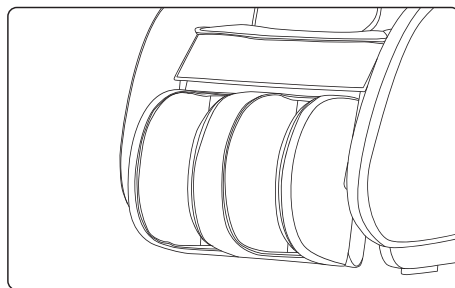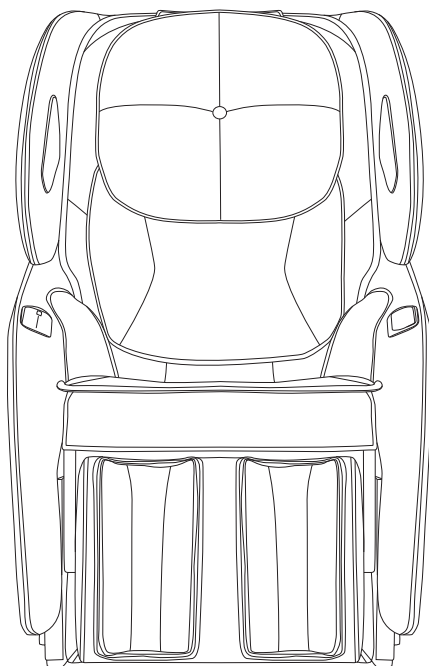

按摩模式: 翻转可享小腿气压按摩

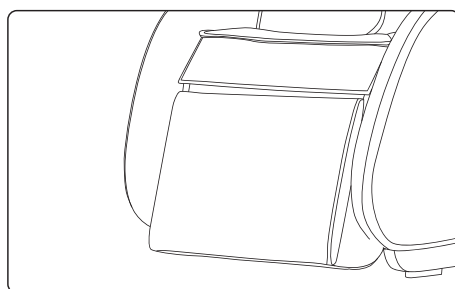


休闲模式: 再翻转可做晒脚蹬, 轻松收纳, 简洁方便


打开电源

! 注意


产品接入电源线

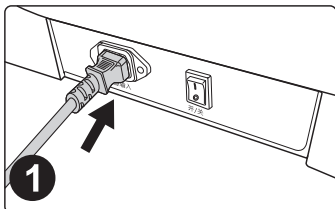

接通电源示意图

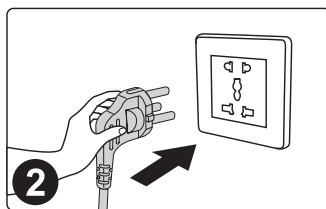

打开电源开关 ("I"位置)

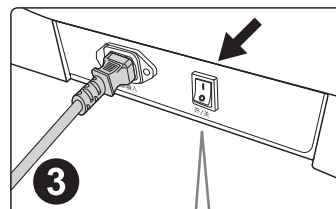

关 I 开





警告

- 使用前请检查电源线及电源插头是否损坏。
- 请遵照本品标定的工作电源要求为本品供电。
- 严禁使用本品标称之外的电源供电。
- 严禁擅自连接各类电源转换装置为本品供电。

产品结构

部件说明

前侧

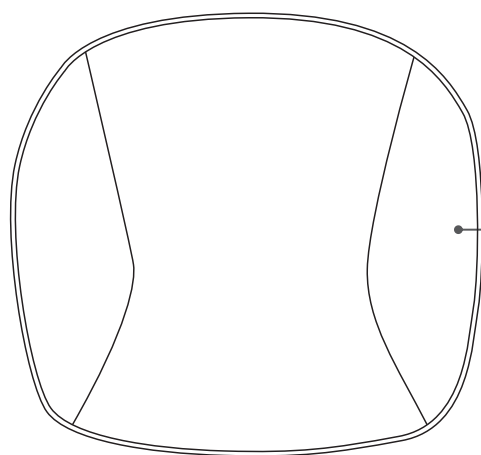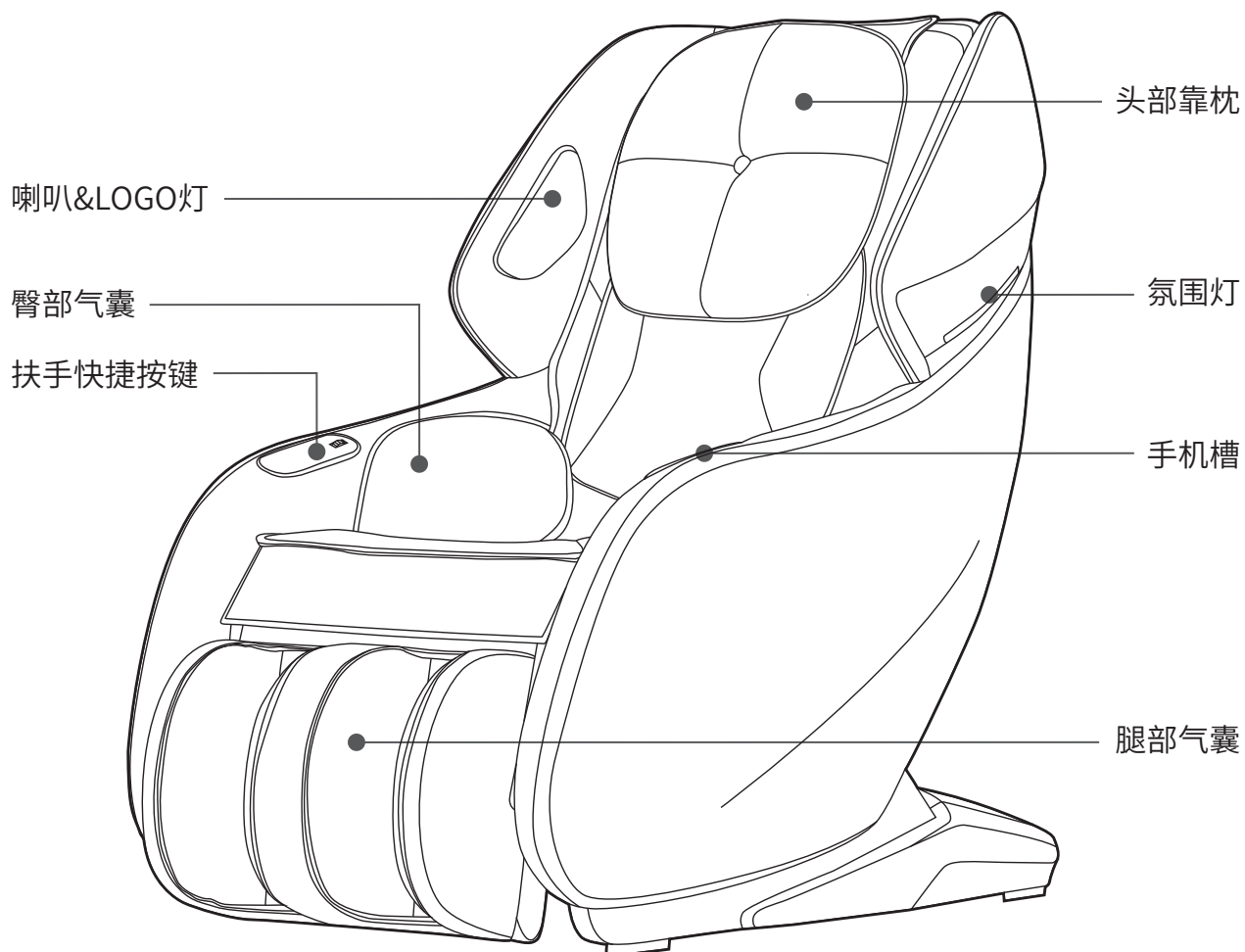


缓冲垫
可用放在背部, 也可放在座部

产品结构


部件说明

后 侧

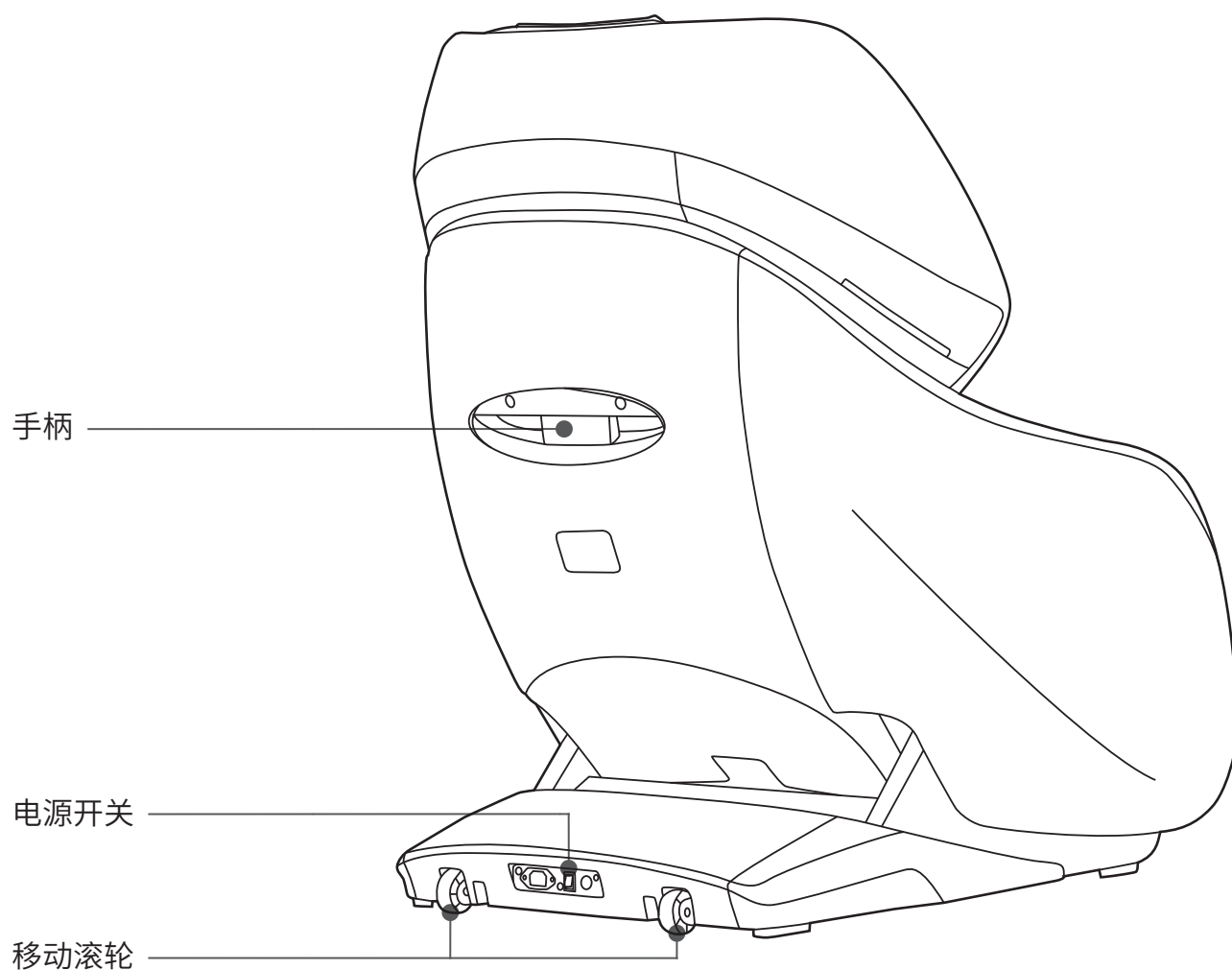


产品结构

功能分布

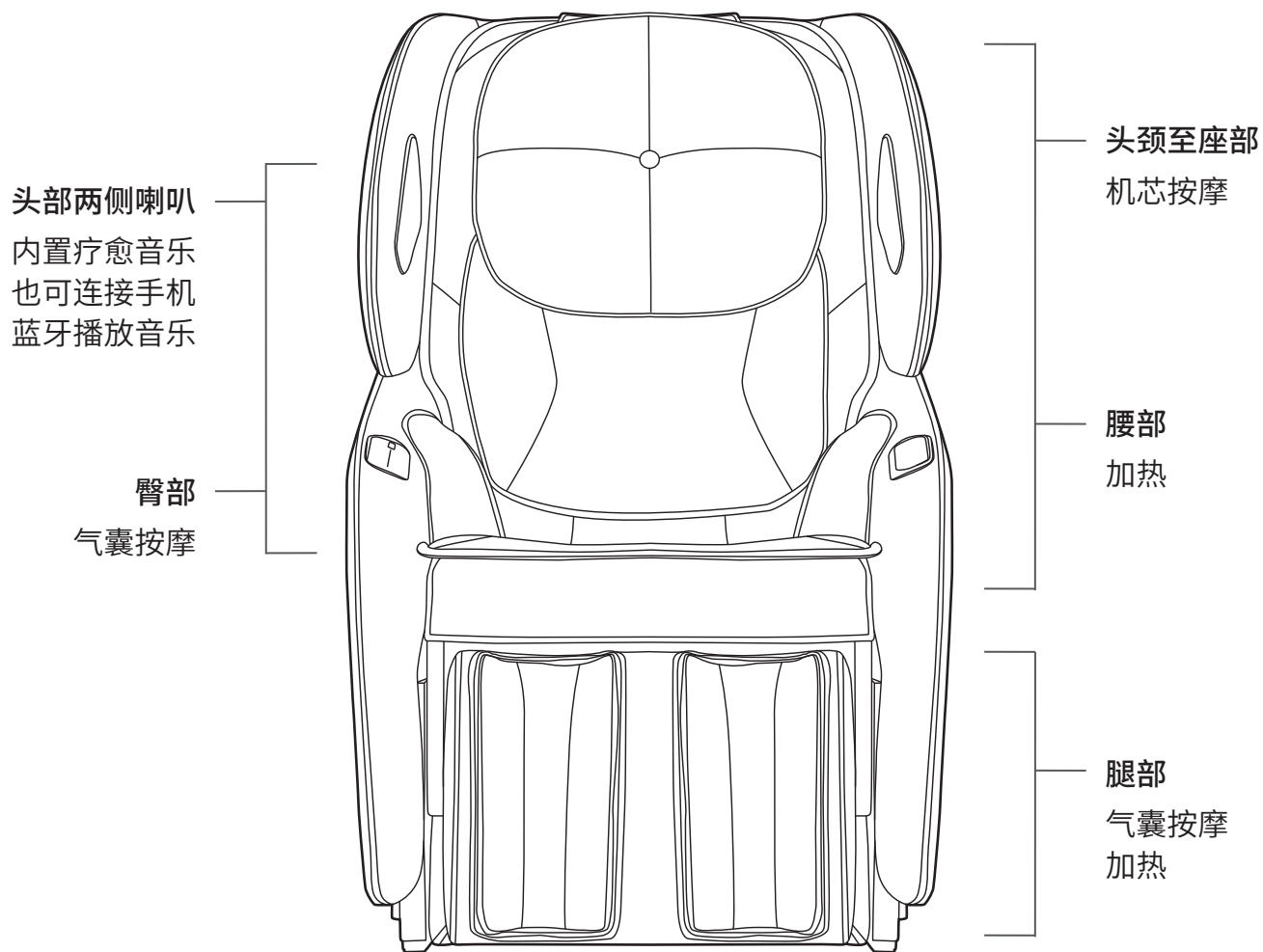


产品结构

一、右扶手快捷按键说明

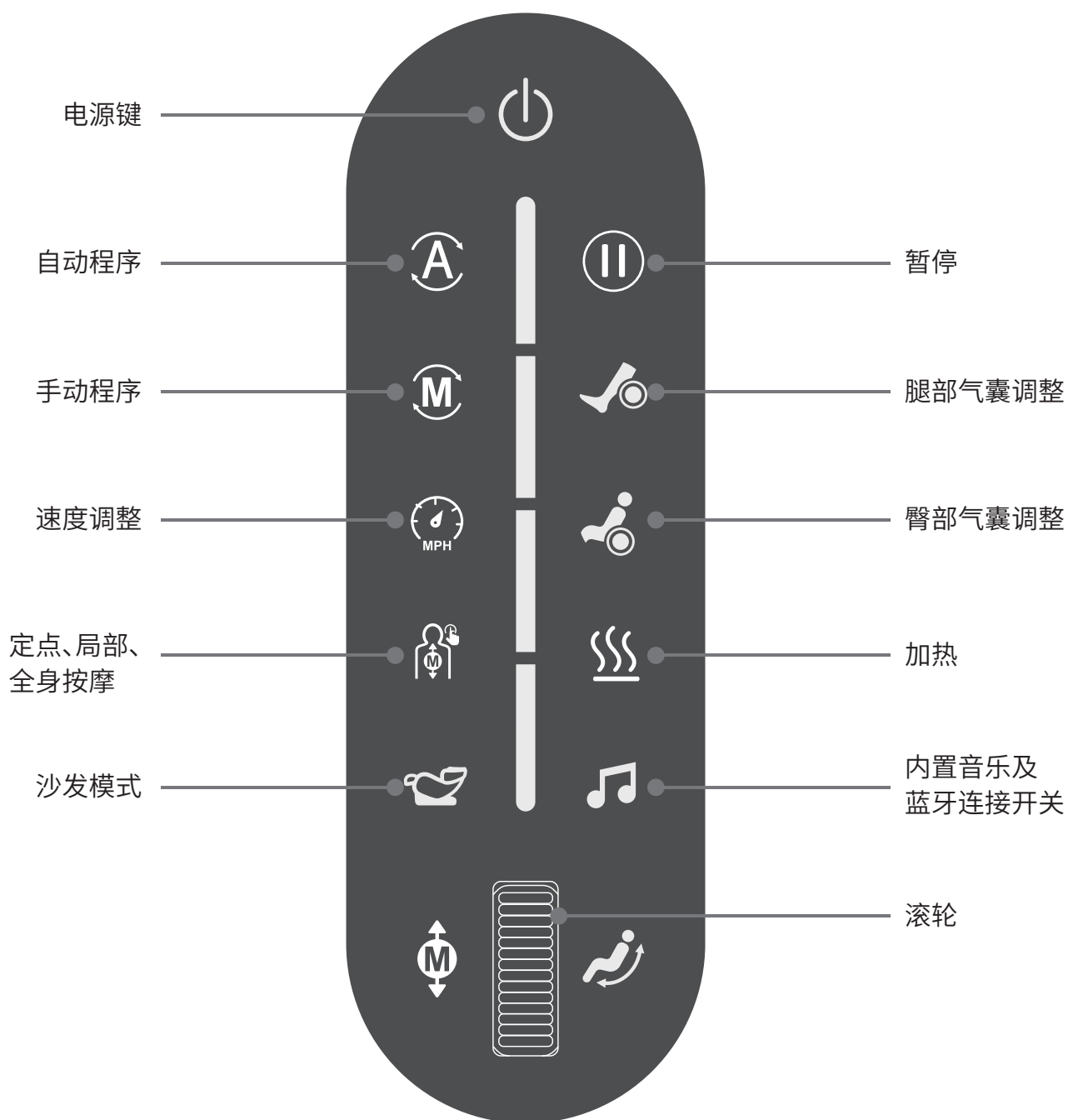

产品结构

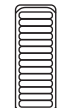按键	按键名	描述
	电源键	短按此键,可开关机。
	自动程序	每短按一次,切换自动程序。
	手动程序	每短按一次,切换手动程序。
	速度调整	在手动程序时,短按此键,调整按摩速度。
	定点、局部、全身按摩	在手动程序时,按此键可切换按摩范围。 短按切换定点、局部、全身按摩。 长按后通过滚轮可调整机芯位置。
	沙发模式	纯倒背功能,蓝牙音响和加热可使用。
	暂停	在按摩过程中按此键,所有按摩动作暂停, 再按此键恢复暂停之前的所有按摩动作。
	腿部气囊调整	功能1:短按开启腿部气囊功能(4档强度可切换) 以及关闭腿部气囊功能。 功能2:长按可开启/关闭,语音播报功能(开机默 认语音播报功能开启)。
	臀部气囊调整	开启臀部气囊功能(4档强度可切换) 以及关闭臀部气囊功能。
	加热	功能1:短按开启或关闭加热功能。 功能2:长按可开启/关闭,喇叭LOGO灯和氛围灯(开机默 认喇叭LOGO灯和氛围灯开启)。
	内置音乐及 蓝牙连接开关	功能1:未连接手机蓝牙时,短按按键切换内置疗愈音乐 (6种模式可调节,含关闭和5款内置疗愈音乐循环切换)。 功能2:连接手机蓝牙时,可播放手机音乐; 长按3秒,可断开手机与蓝牙的连接。
	滚轮	功能1  :向前或向后转动滚轮,控制靠背上升或下降。 功能2  :向前或向后转动滚轮,控制机芯上下位置。

操作说明

二、开始按摩

1.按下电源键,启动按摩椅,靠背自动调整角度。

2.1 选择沙发模式:

- ①按“”键,选择沙发模式,沙发模式没有按摩功能。
- ②沙发模式下,可使用内置音乐、蓝牙音响连接和加热功能,加热功能开启后约15分钟后自动关闭。
- ③如果需要结束沙发模式,请按“”键结束沙发模式,靠背自动恢复直立状态,右扶手快捷按键关闭。


2.2 选择自动程序:

- ①按“”键,选择自动程序。
- ②选择完成后会自动进行人体肩部位置检测,请保持坐姿与按摩椅贴合。
- ③如果检测到的位置与实际肩部位置有偏差,请在“滴滴声内”通过滚轮调整机芯到合适的肩部位置。约10秒内无肩部位置调整,则进入自动程序。

2.3 选择手动程序:

- ①按“”键,选择手动程序。
- ②选择完成后会自动进行人体肩部位置检测,请保持坐姿与按摩椅贴合。
- ③如果检测到的位置与实际肩部位置有偏差,请在“滴滴声内”通过滚轮调整机芯到合适的肩部位置。约10秒内无肩部位置调整,则进入手动程序。

● 躺卧角度调整

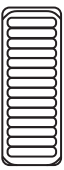功能	按键	描述
起坐		往前转滚轮,靠背缓缓升起,松开此键,则立即停止升起。 到了极限位置仍转动滚轮,短滴滴音提示您已到极限位置。
躺卧		往后转滚轮,靠背缓缓下降,松开此键,则立即停止下降。 到了极限位置仍转动滚轮,短滴滴音提示您已到极限位置。


操作说明

● 自动程序

功能	按键	程序名称	描述
自动按摩	 橙红色	久坐无忧	为久坐人群打造,沉浸放松的同时守护健康。深度按摩15分钟后,休息30分钟;再进入两次“按摩5分钟-休息30分钟”循环;最后,以5分钟的按摩为您舒缓收尾,结束按摩程序。
	 深蓝色	全身疲劳恢复	缓慢深度按摩,消除疲劳,彻底放松。
	 绿色	全身律动	有节奏的敲击动作,放松全身,释放压力。
	 粉色	全身舒缓	以揉捏手法为主,慢慢按摩进行全身舒缓。
	 橘色	全身拉伸	拉伸全身肌肉,舒展筋骨。
	 蓝色	肩颈按摩	重点针对肩颈部位做按摩。
	 黄色	腰部按摩	以腰部为重点进行按摩。
	 紫色	骨盆按摩	以骨盆周围为重点进行按摩。
	 白色	疗愈放松	以气囊按摩和拉伸为主的放松程序。

操作说明

● 手动程序

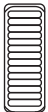功能	按键	描述
手法	 深蓝色	揉捏手法
	 绿色	变速揉捏手法
	 粉色	捶打手法
	 橘色	变速捶打手法
	 蓝色	揉捏捶打手法
	 黄色	变速揉捏捶打手法
	 紫色	横向打圈揉捏手法
	 白色	推拿手法
按摩速度		在手动程序时,短按此键,切换4档按摩速度。 手动程序的“推拿”手法时,无法调节按摩速度。
按摩范围		短按切换定点、局部、全身按摩。
	        	①固定位置定点按摩 ②小范围局部往返按摩 ③全身往返按摩
		在定点、局部按摩时,长按“  ”键后,可通过滑动滚轮“  ”调整机芯位置。

操作说明

● 气压按摩

功能	按键	描述
腿部气囊调整		短按此键调节腿部气囊共5种模式, 含关闭和4档气压强度循环切换。长按此键约3秒可开启/关闭, 语音播报功能 (开机默认语音播报功能开启)。
臀部气囊调整		短按此键调节臀部气囊共5种模式, 含关闭和4档气压强度循环切换。

● 加热按摩

功能	按键	描述
加热		短按此键开启或关闭加热功能, 开启3分钟后有温热。长按此键约3秒可开启/关闭, 喇叭LOGO灯和氛围灯 (开机默认喇叭LOGO灯和氛围灯开启)

● 暂停/启动按摩键

功能	按键	描述
暂停/启动		在按摩过程中按此键, 所有按摩动作暂停, 再按此键恢复暂停前的所有按摩动作。

操作说明

三、蓝牙音响播放操作说明

- 1、进入智能设备主菜单,打开“设置”-选择“蓝牙”选项—打开“蓝牙”--蓝牙自动“搜索新的蓝牙设备”进行搜索。
- 2、智能设备将搜索到相应的蓝牙型号(C1000L-XXXXXX),点击配对按钮,如询问是否与该设备配对,选择“配对”即可完成配对。
- 3、打开智能设备的音乐播放器,选择歌曲进行播放。

四、语音播报功能

选择自动程序“**A**”或者手动程序“**M**”或者沙发模式“”时,语音播报当前选择的程序名称。

五、结束按摩


- 1、在按摩过程中,按下右扶手快捷按键的电源键,或者按摩定时结束后,立即关闭所有按摩功能,靠背维持倒背角度不复位。如需恢复直立状态,需再次按下扶手快捷电源键。

按摩结束后3分钟内:


- 右扶手快捷按键“**A**”“**M**”“”“”闪烁,可切换按摩程序、沙发模式以及调节机芯位置。
- 可调整机芯位置。长按“”键后,通过滑动滚轮“”调整机芯位置。

- 2、切断整机电源,附图(整机电源切断示意图)。 关闭电源开关 拔掉电源插头示意图


关闭电源开关

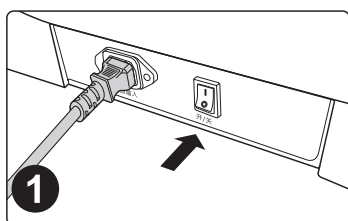

拔掉电源插头示意图

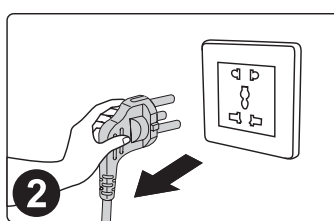

拔掉产品连接电源线

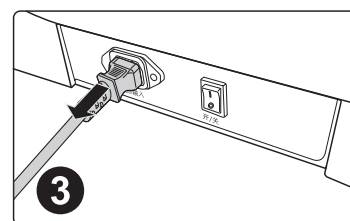

清洁PU皮革和塑料部分

使用柔软的干布擦拭皮革。

■切勿使用诸如稀释剂、汽油等化学品清洁本机。

■使用市面销售的皮革保养品（抹布）时，请遵照其使用说明。

■如果PU皮革特别脏，则通过以下方式擦拭。

①将软布浸入水中或含3%至5%中性洗涤剂的热水中，然后彻底拧干。

②使用上述软布擦拭皮革表面。

③使用浸过清水且已彻底拧干的布料擦掉清洁液。

④使用拧干的软布擦拭。

⑤使其自然风干。


■难以去除污渍时，请将在市面上购买的三聚氰胺泡棉浸入中性洗涤剂中，然后用它擦拭本机。

■不要使用吹风机吹干表面。

■由于布料的颜色会染到PU皮革的表面上，因此在使用牛仔布和彩色布料擦拭本机时务必小心。

■不使皮革长时间与塑料接触，因为这会导致褪色。

■PU皮革有变色的可能，所以在使用染发剂时，请将接触的部分用毛巾覆盖。

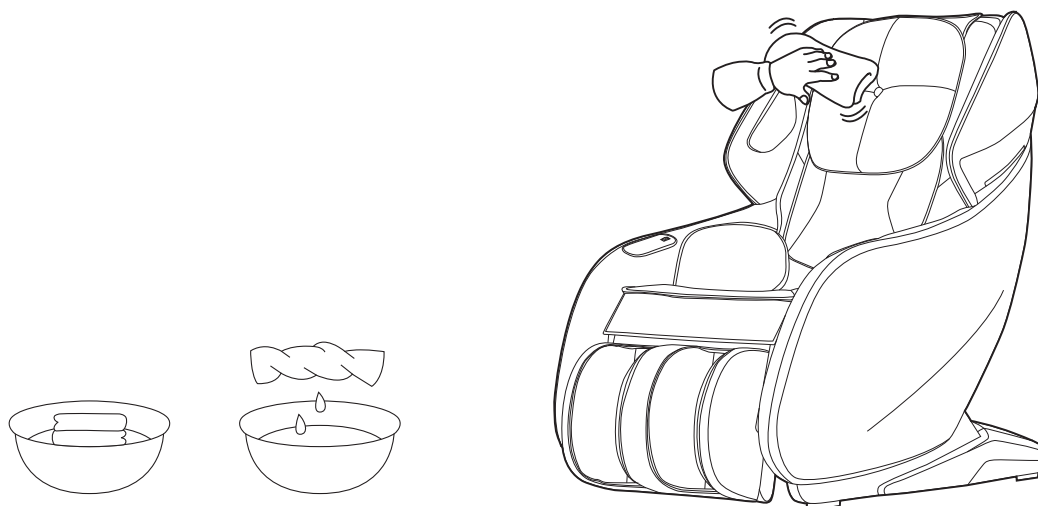

故障检修

故障	靠背到达某一位置，按对应调节按键不再变动，并发出连续“嘀、嘀”音。
处理	出于产品结构设计和人体工学要求，本产品对姿态调整的极限状态做了限制性保护设计。同时到达极限时会发出提醒声音。

故障	本机开启后功能未运行或部分功能未运行。
处理	本机开关键按动开启后，需要人为选定自动按摩程序或其它工作状态，如未操作，机器会在3分钟后自动关机。如果选定了手动运行方式，可能未被选定的功能处于关闭状态，需手动模式下人为设置工作方式。

故障	开机中进入暂停状态。
处理	本机的背部下方具有防夹功能，检测到异物时会进入暂停模式。将异物从背部下方移除，按下暂停按钮恢复按摩。

故障	本机在调整姿态时发出皮革摩擦声。
处理	本产品整机采用了符合环保要求的高级抗腐皮革，因皮革材料的固有特性，在相对运动处摩擦会产生正常的轻微响声，属正常现象。注意：如本机在运行时听到织物或皮革撕裂声，请立即停止使用，并寻求指定专业人员检修。

故障	按摩轮没有达到肩部或颈部的位置。
处理	如果头部没有接触到靠枕，或背部没有接触到靠背，在体型检测过程中肩部位置可能低于实际位置。坐在座椅的最深位置，将头部靠在靠枕上，然后从头开始重新操作。

故障	本机已受损。 电源线或电源插头异常发热。
处理	为防止事故发生，请务必与授权服务中心联系。

所有对本产品的不明或疑问请随时与指定服务人员联系。

产品规格

产品名称	按摩椅
型号	LR-C1000L
额定电压	220V~
额定频率	50Hz
额定消耗功率	100W
额定时间	30分钟
计时器	约15分钟
噪音	≤55dB
安全结构	Class I
执行标准	GB/T 4706.1-2024 GB/T 4706.10-2024
制造地	中国

本产品包含型号核准代码为：
CMIIT ID:2020DP12043无线电发射模块。

保留备用

本公司保留对产品及说明书改进的权利，如有改动恕不另行通知，产品外观以实物为准；本册经过认真核对，但不排除可能存在印刷错漏或内容上的误解，敬请谅解，本公司保留解释权；

本说明书部分图片为示意图，仅供参考，以实物为准；

本产品不能代替医疗复健等医用器械，并请遵循专业人士的相关建议。

此说明书应保留备用，说明书中的内容可能会更新或变更，公司产品也会不断出新，如未同步通知，敬请谅解。

如有任何问题可以拨打我们的客服电话或登录我们的官网查询。

废弃物不当处置会造成对环境的污染

FUJIIRYōKI[®]

富士医疗器

富技优器健康科技(上海)有限公司