

FUJIIRYOKI®

富士医疗器


家庭用

使用说明书

内附保修卡

品名：脚部按摩器

型号：FA600FS

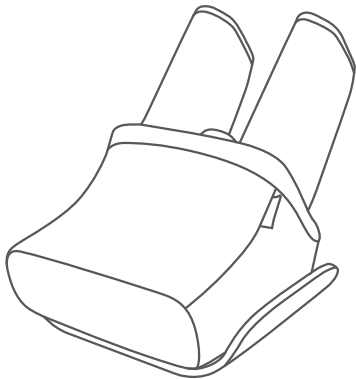

- 非常感谢您购买使用本公司产品。
- 使用本产品前请务必仔细阅读使用说明书，并正确操作使用。
- 此外，该说明书内附保修卡，请阅读后妥善保管。

* 产品设计规格可能会有部分更改，敬请谅解。

目录

	安全注意事项·····	1~5
	包装内容及产品结构·····	6
	使用方法·····	7~10
	保养及保管方法·····	11
	故障排除方法·····	12
	产品规格·····	13
	保修及售后服务·····	14~17

安全注意事项

为了避免对使用者及他人造成危害或发生财产损失，请务必遵守如下说明事项。

图形符号说明 为了防止使用者或他人遭受危害和经济损失，本文中记述了确保安全正确使用的注意事项。



警告

该栏是“设想可能导致死亡或重伤”的内容。



注意

该栏是“设想可能造成受伤或财产损失”的内容。



不得执行的“禁止”内容



必须执行的“强制”内容

关于症状



如您在使用时感觉到身体异常，请立即停止使用并咨询医生。

- 不能表达自己意思或身体无法自主行动的人员或者幼儿
- 对温度感知能力低的人员
- 服用了安眠药等的人员或者醉酒人员



安全注意事项



下述人员在使用前请务必咨询医生，以免造成事故或损害健康等情形。

- 恶性肿瘤患者
- 心脏病患者
- 怀孕初期不稳定期间或刚生产后的女性
- 因糖尿病等引发的高度末梢循环神经障碍者、知觉障碍者
- 需静养身体的患者
- 脊椎骨折、扭伤、肌肉拉伤等急性疼痛性患者
- 体温超过38℃以上 例如：急性炎症症状（倦怠感、全身发冷、血压变动等）症状严重的人，体力衰弱者
- 使用部位的皮肤出现异常（感染、创伤等）的人员
- 在其他医疗机构接受治疗的患者
- 曾有过低温烫伤经历的人员

使用后皮肤出现发疹、发红、发痒等症状时，请立即停止使用并咨询医生。

如您在使用时感觉到身体异常，请立即停止使用并咨询医生，否则可能会对健康造成损害。

如您在使用本产品后无效果，请咨询医生或专业人士，否则可能会造成事故或对健康造成损害。



安全注意事项

关于使用



请勿给幼童使用，（有家长、医生以及专家监督的情况除外）否则可能会导致事故或者受伤。

请勿给骨质疏松患者使用，否则可能会导致事故或者受伤。

请勿在湿疹、发炎、伤口、皮肤部位使用，否则可能会导致事故或者身体不适。

请勿在睡眠时使用，否则可能会导致事故或者身体不适。

请勿在碰撞、扭伤等部位使用，否则可能会导致受伤。

请避免在饮酒、饭后约 30 分钟~1 小时内使用，否则可能会对健康造成损害。

请勿用于治疗外的用途，否则可能会导致事故或者受伤。

请勿与其他治疗仪器同时使用，否则可能会对健康造成损害。

使用于皮肤比较脆弱的部位时请务必小心，请勿连续长时间使用加热模式，否则可能会导致烫伤。

关于“低温烫伤”即使在温度比较低(40°C~60°C)的情况下，
如果长时间接触皮肤的相同部位，在没有感知到温度过高或者疼痛的情况下
仍然会有烫伤的风险。请勿长时间在相同部位连续使用。

请勿让仪器接触到水或用水清洗仪器，否则可能会导致触电、短路、失火、故障等。

使用时请勿强行推压本体，否则可能会导致受伤及破损。

请勿在高温处使用，否则可能会导致失火及发热、烫伤等。

使用前请检查电源线及电源插头是否损坏，请遵照本品标定的工作电源要求为本品供电。

请勿使用本品标称之外的电源供电，否则可能会导致事故或烫伤。



安全注意事项

关于使用（接上页）



在感觉过热时请立即停止使用。

- 在冬季身体寒冷情况下使用时，对温度感知的敏感度可能会降低。
- 在强力模式下感觉温度过高时，推荐切换低档模式使用。

请勿擅自连接各类电源转换装置为本品供电。

发生故障时，请勿擅自进行修理，而应联系您购买产品的店面或生产销售商。

请务必在阅读使用说明书后正确使用。

请定期检查产品否则可能会导致事故或受伤。

长期不使用，或使用前请确认脚套内有无异物，避免自身受到损伤。



安全注意事项

关于异常（故障）



发现故障时请立即停止使用，否则可能会导致事故或受伤。

其他



请勿对本产品自行改造。

产品出现故障时，请勿自行修理，请与购买店铺或经销商联络。

否则可能会导致火灾、触电、受伤。


🔍 包装内容及产品结构

确认包装内物品

打开包装后，请在使用前确认是否包含了下述物品

- 本体
- 使用说明书
- 可换洗布套 (置于靴筒里侧)

产品示意图

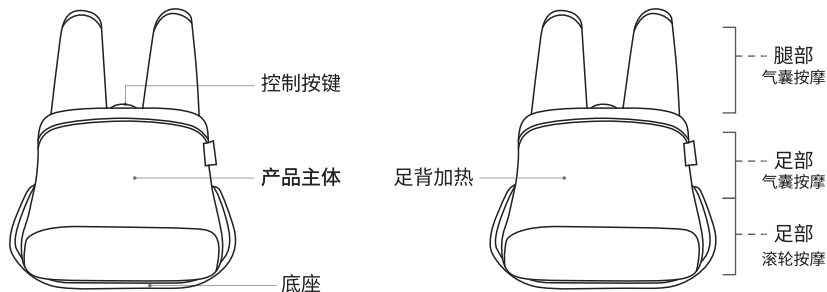

🔍 控制按键说明



操作说明

按键	描述
	在待机状态,短按电源键,产品启动白灯亮,默认进入自动程序一,低档加热开启;再次短按电源键,产品关闭灯灭,进入待机状态。
	加热:切换加热模式,低档加热-红色呼吸灯亮;高档加热-红色灯常亮;关闭加热-灯灭。自动模式默认低档加热,加热在任何模式下都可单独操作。
	气压强度:仅能在气压按摩开启时按动。 切换气压强度,低档强度-白灯亮;中档强度-蓝灯亮;高档强度-绿灯亮。
	气压按摩: 按第一次将开启足部和腿部气压按摩—白灯亮;按第二次只是足部气压按摩—蓝灯亮; 按第三次仅对腿部进行气压按摩—绿灯亮;按第四次可关闭气压—灯熄灭。
	滚轮按摩:按第一次开启滚轮按摩—白灯亮;按第二次关闭滚轮—灯灭。
	自动程序:开机默认自动程序一养生追剧-蓝灯亮;短按切换自动程序二美腿塑形-绿灯亮;短按切换自动程序三睡前放松-白灯亮;依次循环切换。

切断整机电源示意图 (拔掉电源插头操作)





使用方法・注意事项



请勿在浴室等湿气重的场所使用，也不要让水等液体与产品接触。

否则可能会导致触电和故障。

请勿过度用力地使身体接触本体，否则可能会导致故障、事故和受伤。

请勿对本体强加剧烈冲击，否则可能会导致故障或事故。

请勿将被子或毛毯盖上使用，否则可能会造成本体内部高温。

按摩过程中及按摩结束后，不可直接站立在机器上，以免因站立导致机器损坏。



请避免在同一部位连续使用。

长时间的连续使用，反而会过度刺激，造成反效果和受伤。

使用时若对产品施加过大的负荷，保护装置会自动运行，产品停止运作。

若产品停止运行，请让本体稍作休息（约1小时）后再重新启动。


具有加热功能，不能承受过高热度的人员在使用时请务必小心。



注意 使用前的注意事项

- 使用前请先确认产品布套部位是否存在布套破损。
如有破损请勿使用。
- 使用前请先确认开关、定时是否正常工作。
- 长时间未使用的情况下，请再次阅读说明书，
并确认产品是否正常且安全运作。
- 使用时若对产品施加过大的负荷或者长时间使用时，
一段时间后保护装置会自动运行，产品停止运作。
- 若产品停止运行，请让本体稍作休息（约1小时）
后再重新启动使用。
- 请在脚部干燥时使用本产品，以延长换洗布套寿命。

请确认按摩部位是
否存在布套破损。

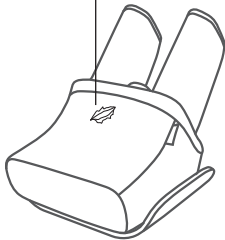



保养方法·保管方法

布套轻微脏污清洁

- 请使用柔软的布料进行干擦。
- 布套的脏污，请用温水稀释中性清洗剂后，浸入柔软布料，拧干后擦拭，最后擦干。
(※本体布套无法取下)
- 为防止变色，请勿使用稀释剂、含油等溶剂。
- 抚平褶皱,整理好形状,于阴凉处晾干。

保存方法

- 请在去除污渍和灰尘后保存在干燥的地方。
- 长时间不使用时，请盖上布套，收纳在不容易沾染灰尘的地方。
- 请保管在幼儿和儿童无法取到的地方。
- 废弃时，请根据各地相关垃圾处理规定进行处理。
- 电源线等请捋顺后保管。

故障排除方法

在送修前请再次阅读本说明书进行检查，如果还不能解决问题，请联系店铺进行修理。
请勿自行拆卸、修理改造，否则可能引发事故导致受伤。

无法工作	检查电源插头与电源插座连接是否可靠。
	检查电源开关是否打开。
产品在运行时停止工作	是否对产品施加了过大的负荷？ 可能是触发了保护装置导致本体停止运转。 请先让产品休息片刻(约1小时)后，再次启动确认。
异音或声音大	气泵和气阀动作音是产品构造上产生的，并非异常现象。

产品规格

产品名称	脚部按摩器
产品型号	FA600FS
额定电压	220V~
额定频率	50Hz
额定功率	62W
产品定时	15分钟
产品尺寸	约56×40.5×49.5cm
产品重量	约7.2KG
材料	本体：ABS树脂 EVA等 布套：聚酯纤维 氨纶等 底板：多层板
温度	约45°C/50°C
执行标准	GB/T 4706.1-2024 GB/T 4706.10-2024
原产国	中国
制造商	富技优器医疗健康科技（上海）有限公司

保修和售后服务

维修、处理、保养等咨询

有关维修、处理、保养等方面的相关查询，请先联系购买地点。

● 保修卡 **免费保修：1年**

请在购买时从购买地点领取保修卡，检查“购买日期”和“产品名”栏中的条目并仔细阅读内容，妥善保管。
如果保修卡上未注明购买日期和购买地点，请联系购买地点或附上能够证明购买日期和购买地点的文件。
例如送货单或收据，并将其妥善保管。

关于保修

请查看使用说明书故障排除方法页面内容，如有异常，请停止使用并联系购买地点。

- 如果您想在保修期内要求维修，请咨询购买地点，我们将根据保修卡上的内容进行维修。
(请注意，即使在保修期内也可能会向您收费，因此请仔细阅读保修卡。)
- 如果您想在保修期后要求维修，请先咨询购买地点。如果产品功能可以通过维修来维持。
我们将根据您的需求进收费维修。
- 有关售后服务的其他查询或有任何疑问，请联系您的供应商或我们的客户服务人员。

保修卡

产 品 名			
保 修 期 间		自购买时间开始1年内	保 修 对 象
购 买 日 期		年 月 日	序 列 号 码
购 买 信 息	姓 名		
	地 址		
购 买 地 址		电 话	

- ※购买产品时，请确保保修卡上写有购买日期和购买地点。如果未列出，请联系购买地点，或附上显示购买日期和购买地点的文件，例如送货单或收据，并将其保存在安全的地方。
- ※请注意，填写内容后的保修卡内容可用于保修期内的服务活动和随后的检查活动。
- ※本保修承诺在本文档规定的期限和条件下免费维修。因此，本保修不限制客户对发布保修的人（保修责任人）和其他业务的合法权利。

免费维修政策（节选）

有关保修范围和耗材的更多信息，请查看官方网站或咨询售后客服电话。

1.如果在保修期内按照使用说明书、主机贴标等使用条件发生故障，我们将免费维修。

- (a) 如果您想申请免费维修，请联系购买地点。
- (b) 如果您无法从购买地点申请免费维修，请咨询使用说明书中描述的售后电话。

2.在搬家的情况下，请咨询购买地或使用说明书中列出的客户服务台以提出维修请求。

3.如果您因礼物等原因无法向本保修中列出的供应商请求维修，请咨询使用说明书中描述的售后电话。

4.即使在保修期内，在以下情况下也会收取相关维修费用。
※根据故障或损坏的情况，可能无法修复。

- (a) 因使用错误，非销售方授权单位或人员维修或改装不当而导致的故障或损坏；
- (b) 购买后因自行运输、储存不当等造成的故障或损坏；
- (c) 因火灾、地震、水灾、雷击、冻结、其他自然灾害、污染或电压异常造成的故障或损坏；
- (d) 用于一般家庭用途以外的用途（例如用于商业用途）时的故障或损坏；
- (e) 如果未出示本文件；
- (f) 如果保修卡中未输入购买日期、购买者姓名或购买地点，或者内容被修改。
- (g) 实际报修的产品型号、序列号等相关信息与保修卡不符合

5. 保修服务仅在中国有效。

6. 本保修卡将不予补发，请妥善保管，以免丢失。

关于客户咨询信息

有关维修、处理、保养等的查询，请先联系购买地点

售后电话 400-009-7876

关于个人信息的处置

富技优器医疗健康科技（上海）有限公司可能会将咨询的个人信息和内容用于咨询回复、维修、确认咨询等，并可能保留记录。此外，当我们回拨时，还使用数字显示。

您的个人信息将得到妥善管理，除非我们将维修工作进行外包或有其他正当理由，否则不会提供给第三方。如果您有任何问题，请联系我们。

富技优器医疗健康科技（上海）有限公司
FUJI WELLNESS(SHANGHAI)CO.,LTD.

ADD:上海市闵行区申昆路2177号18幢11层1108室

FA600FS Ver.1