

FUJIIRYŌKI®

家庭用

使用说明书

内附保修卡

品名：腹部按摩仪

型号：FA300FS



- 非常感谢您购买使用本公司产品。
- 使用本产品前请务必仔细阅读使用说明书，并正确操作使用。
- 此外，该说明书内附保修卡，请阅读后妥善保管。

* 产品规格可能会有部分更改，敬请谅解。

目录

	安全注意事项	1~5
	包装内各物品及名称	6
	使用方法	7~13
	保养及保管方法	14
	故障排除方法	15
	产品规格	16
	保修及售后服务	17-20



安全注意事项

为了避免对使用者及他人造成危害或发生财产损失，请务必遵守如下说明事项。

图形符号说明 为了防止使用者或他人遭受危害和经济损失，本文中记述了确保安全正确使用的注意事项。



警告

该栏是“设想可能导致死亡或重伤”的内容。



注意

该栏是“设想可能造成受伤或财产损失”的内容。



不得执行的“禁止”内容



必须执行的“强制”内容

本产品不打算由存在肢体、感官或精神能力缺陷或缺少使用经验和知识的人(包括儿童)使用，除非有负责他们安全的人 对他们进行与产品使用有关的监督或指导。应照看好儿童，确保他们不玩耍本产品。

本产品有发热表面，对热不敏感的人使用时必须注意。

本产品应使用标记在器具上的安全特低电压供电(充电电压、电流不超过5V[~] 2A)。

本产品包含不可更换的电池。

关于症状



如您在使用时感觉到身体异常，请立即停止使用并咨询医生。

- 不能表达自己意思或身体无法自主行动的人员或者幼儿
- 对温度感知能力低的人员
- 服用了安眠药等的人员或者醉酒人员



安全注意事项



下述人员在使用前请务必咨询医生。以免造成事故或损害健康等情形。

- 恶性肿瘤患者
- 心脏病患者
- 静脉曲张患者
- 血栓患者
- 怀孕初期不稳定期间或刚生产后的女性
- 因糖尿病等引发的高度末梢循环神经障碍者、知觉障碍者
- 需静养身体的患者
- 脊椎骨折、扭伤、肌肉拉伤等急性疼痛性患者
- 体温超过38°C以上 例如：急性炎症症状（倦怠感、全身发冷、血压变动等）症状严重的人，体力衰弱者
- 使用部位的皮肤出现异常（感染、创伤等）的人员
- 在其他医疗机构接受治疗的患者
- 曾有过低温烫伤经历的人员

使用后皮肤出现发疹、发红、发痒等症状时，请立即停止使用并咨询医生。

如您在使用时感觉到身体异常，请立即停止使用并咨询医生。否则可能会对健康造成损害。

如您在使用本产品后无效果，请咨询医生或专业人士。否则可能会造成事故或对健康造成损害。

关于电池



本产品包含不可更换的电池。

请勿投入火中、加热、高温、低温下进行充电、使用、放置。

否则可能导致发热、失火、破损。



安全注意事项

关于使用



请勿给幼童使用。（有家长、医生以及专家监督的情况除外）否则可能会导致事故或者受伤。

请勿在头部以及面部、黏膜、湿疹、发炎、伤口、皮肤病部位使用。

否则可能会导致事故或者身体不适。

请勿在睡眠时使用。否则可能会导致事故或者身体不适。

请勿在碰撞、扭伤等部位使用。否则可能会导致受伤。

请避免在饮酒、饭后约 30 分钟~1 小时内使用。否则可能会对健康造成损害。

请勿用于治疗以外的用途，也不能替代正规医疗手段。否则可能会导致事故或者受伤。

请勿与其他治疗仪器同时使用。否则可能会对健康造成损害。

使用于皮肤比较脆弱的部位时请务必小心。

请勿连续长时间使用加热模式,否则可能会导致烫伤。

关于“低温烫伤”

即使在温度比较低（40℃~60℃）的情况下，如果长时间接触皮肤的相同部位，在没有感知到温度过高或者疼痛的情况下仍然会有烫伤的风险。

请勿长时间在相同部位连续使用。

请勿让产品接触到水或用水清洗产品。否则可能会导致触电、短路、失火、故障等。

使用时请勿强行推压本体。否则可能会导致受伤及破损。

请勿在高温处使用。否则可能会导致失火及发热、烫伤等。



安全注意事项

关于使用（接上页）



在感觉过热时请立即停止使用。

- 在冬季身体寒冷情况下使用时，对温度感知的敏感度可能会降低。
- 在温度高档模式下感觉温度过高时，推荐切换低档模式使用。

否则可能会导致事故或烫伤。

发生故障时，请勿擅自进行修理，而应联系您购买产品的店面或生产销售商。

请务必在阅读使用说明书后正确使用。

请定期检查产品，否则可能会导致事故或受伤。

关于充电电源



请勿划伤、损坏、加工、强行弯曲、拉伸、扭动Type-C充电线，否则可能会导致短路、故障。

请勿用于电脑、手机等移动设备充电，否则可能会导致短路、故障。

电线或电源插头等损伤、插入插座松动时，请勿使用，否则可能会导致短路、火灾。



安全注意事项



保养本产品时，务必将Type-C充电线及充电适配器从插座中拔出。另外，拔出Type-C充电线或充电适配器时请保持手部干燥。否则可能会导致触电。

拔出电源适配器或者Type-C充电线时，请不要强拉Type-C充电线，必须抓住充电电源适配器或Type-C充电线头部将其拔出。否则可能会导致短路、火灾。

不使用本产品时请将充电电源适配器或Type-C充电线拔出并适当收纳好。

否则可能会出现绝缘老化导致的漏电、火灾。

关于异常（故障）



发现故障时请立即停止使用。否则可能会导致事故或受伤。

其他



请勿对本产品自行改造。

产品出现故障时，请勿自行修理，请与购买店铺或经销商联络。

否则可能会导致火灾、触电、受伤。




🔍 包装内各物品及名称

确认包装内物品

打开包装后，请在使用前确认是否包含了下述物品

• 本体 * 1 • Type-C充电线* 1 • 使用说明书* 1 • 标准腰带*1 • 延长腰带*1

各部件名称

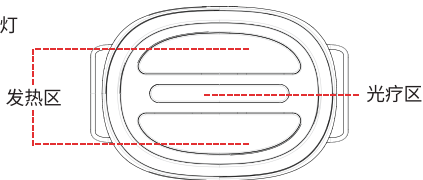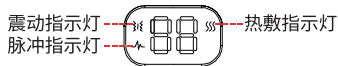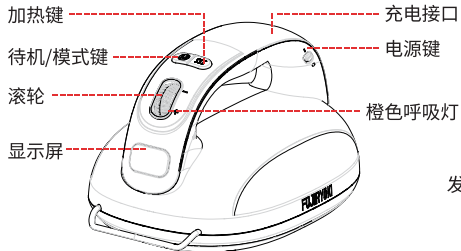



控制按键说明



待机/模式键



加热键



滚轮



电源键



操作说明

图标	按键/滚轮	操作	状态提示
	电源键	推动推钮	开机：橙色呼吸灯亮 关机：全机熄灭
	待机/模式键	长按2秒	绿灯亮，开启默认自动模式一档（揉腹养生）；再次长按2秒，进入待机模式。
		短按	模式切换：绿灯为自动模式/蓝灯为手动模式
	滚轮	滚动	自动模式：切换6档 1档：揉腹养生（1-5档的震动+加热中档） 2档：热燃健腹（6-10档的震动+加热中档） 3档：温暖暖腹（加热高档） 4档：脉冲舒缓（EMS低档+加热中档） 5档：体态轻盈（EMS中档+震动中档） 6档：综合放松（EMS中档+震动中档+加热中档）
			手动模式：震动强度1-10档无极调节
	加热键	短按	循环切换：低档（蓝灯）→中档（红灯） →高档（紫灯）→关闭（指示灯熄灭）
		长按2秒	开启/关闭语音播报



使用方法・注意事项



请勿在浴室等湿气重的场所使用。也不要让水等液体与产品接触。

否则可能会导致触电和故障。

请勿过度用力的使身体接触本体。否则可能会导致故障、事故和受伤。

请勿对本体强加剧烈冲击。否则可能会导致故障或事故。

请勿将被子或毛毯盖上使用。否则可能会造成本体内部高温。



请避免在同一部位连续使用。

长时间的连续使用，反而会过度刺激，造成反效果和受伤。

使用时若对产品施加过大的负荷，保护装置会自动运行，产品停止运作。

若产品停止运行，请让本体稍作休息(约1小时)后再重新启动。

具有加热功能，不能承受过高热度的人员在使用时请务必小心。




使用方法・注意事项



注意 使用前的注意事项

- 使用前请先确认产品是否存在破损。
如有破损请勿使用。
- 使用前请先确认开关、定时是否正常工作。
- 长时间未使用的情况下，请再次阅读说明书，
并确认产品是否正常且安全运作。
- 使用时若对产品施加过大的负荷或者长时间使用时，
一段时间后保护装置会自动运行，产品停止运作。
- 若产品停止运行，请让本体稍作休息（约1 小时）
后再重新启动使用。
- 本产品不能在充电的同时使用。
请在充电结束之后，将Type-C充电线拔下后使用。

请确认本体和按摩
部位是否存在破损。

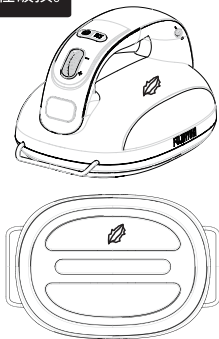



使用方法・注意事项

首次使用或长时间不使用时，请在使用前充电。此外，根据需要定期充电。

充电


警告

- 如果Type-C充电线损坏或插入松动，请勿使用。
否则可能会导致触电、短路或火灾。
- 请勿用湿手插拔Type-C充电线。
否则可能会导致触电。






使用方法・注意事项

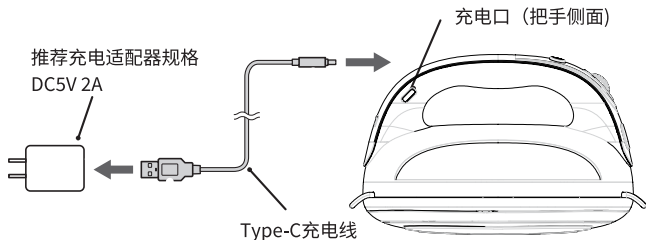

1. 充电前请确认是否有将Type-C充电线正确地插入把手侧面的充电口，并确认是否有插到底。
2. 请将Type-C充电线插入充电适配器后，再将电源适配器插入插座。
请确保适配器和充电线状态良好。
充电开始后滚轮的橙色灯常亮。
3. 充电完成后请将Type-C充电线从本体端和适配器端拔出，并妥善保管。
充电过程中不能使用。

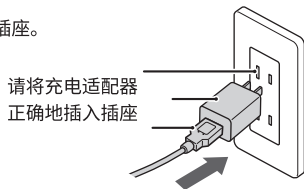



使用方法 • 注意事项

充电显示:

弱电状态: 滚轮橙灯, 快速闪烁。

充电状态: 滚轮橙灯常亮, 充电时产品不能使用。

充饱状态: 加热按键及待机/模式键灯常亮。

关机或程序运行完, 显示屏上将显示剩余电量:

高电量81%-100%: 显示屏显示: FU

中电量41%-80%: 显示屏显示: HI

低电量11%-40%: 显示屏显示: LO

低于10%: 显示屏显示: CH



保养方法・保管方法

清洁

- 本产品使用过程中可能会接触人体表面，使用完毕后可能在产品上会有汗渍残留，建议使用完毕后先清洁再收纳。
- 清洁之前，确认产品已关闭，并将Type-C充电线拔下。
- 请使用干布清洁擦拭产品、按键表面。
- 请勿使用具有腐蚀性的清洁剂，如苯或稀释剂来清洁产品。
- 请勿以湿布清洁控制开关，以免故障。
- 请勿用水冲洗产品，或将水或其他液体弄到产品内部。

保存方法

- 请在去除污渍和灰尘后，保存在干燥的地方。
- 长时间不使用时，请收纳在不容易沾染灰尘的地方。
- 请保管在幼儿和儿童无法取到的地方。
- 废弃时，请根据各地相关垃圾处理规定进行处理。
- Type-C充电线等请捋顺后保管。
- 保持产品清洁并远离高湿度或高温的场所，以及有挥发性气体的环境。



故障排除方法

在送修前请再次阅读本说明书进行检查，如果还不能解决问题，请联系店铺进行修理。
请勿自行拆卸、修理改造，否则可能引发事故导致受伤。

异常情况	可能原因	处理方法
无法开机	1.电池电量不足 2.电源键未开启	1.接入电源进行充电 2.推动产品侧面的推钮开关
突然停止操作	1.电池电量不足 2.按摩时间超过10分钟 3.连续使用时间过长，产品过热保护	1.接入电源进行充电 2.重新长按待机/模式键2秒开启功能模式 3.产品冷却后重新长按待机/模式键 2秒开启功能模式
按摩部位不加热	热敷未开启	请开启热敷



产品规格

产品名称	腹部按摩仪
产品型号	FA300FS
充电电压	5V ---
充电功率	10W
工作电压	7.4V ---
工作功率	14.8W
产品定时	10分钟
产品尺寸	(约) 17cm*11.5cm*10.3cm
产品重量	780g
材料	本体：ABS PC POM等 腰带：PU革，尼龙布
温度	约38°C/40°C/42°C
执行标准	GB/T 4706.1-2024 GB/T 4706.10-2024
原产地	中国
制造商	富技优器健康科技（上海）有限公司

保修和售后服务

维修、处理、保养等咨询

有关维修、处理、保养等方面的相关查询，请先联系购买地点。

保修卡 **免费保修：1年**

请在购买时从购买地点领取保修卡，检查“购买日期”和“产品名”栏中的条目并仔细阅读内容，妥善保管。
如果保修卡上未注明购买日期和购买地点，请联系购买地点或附上能够证明购买日期和购买地点的文件。
例如送货单或收据，并将其妥善保管。

关于保修

请查看使用说明书故障排除方法页面内容，如有异常，请停止使用并联系购买地点。

- 如果您想在保修期内要求维修，请咨询购买地点，我们将根据保修卡上的内容进行维修。
(请注意，即使在保修期内也可能会向您收费，因此请仔细阅读保修卡。)
- 如果您想在保修期后要求维修，请先咨询购买地点。如果产品功能可以通过维修来维持。
我们将根据您的需求进行收费维修。
- 有关售后服务的其他查询或有任何疑问，请联系您的供应商或我们的客户服务人员。

保修卡

产 品 名				
保 修 期 间		自购买时间开始1年内	保 修 对 象	本体（耗材包材除外）
购 买 日 期		年 月 日	序 列 号 码	
购 买 信 息	姓 名			
	地 址			
购 买 地 址			电 话	

- ※购买产品时，请确保保修卡上写有购买日期和购买地点。如果未列出，请联系购买地点，或附上显示购买日期和购买地点的文件，例如送货单或收据，并将其保存在安全的地方。
- ※请注意，填写内容后的保修卡内容可用于保修期内的服务活动和随后的检查活动。
- ※本保修承诺在本文档规定的期限和条件下免费维修。因此，本保修不限制客户对发布保修的人（保修责任人）和其他业务的合法权利。

免费维修政策（节选）

有关保修范围和耗材的更多信息，请查看官方网站或咨询售后客服电话。

1.如果在保修期内按照使用说明书、主机贴标等使用条件发生故障，我们将免费维修。

- (a) 如果您想申请免费维修，请联系购买地点。
- (b) 如果您无法从购买地点申请免费维修，请咨询使用说明书中描述的售后电话。

2.在搬家的情况下，请咨询购买地或使用说明书中列出的客户服务台以提出维修请求。

3.如果您通过礼品等方式获得产品，无法向本保修卡所列供应商请求维修，请咨询使用说明书中描述的售后电话。

4.即使在保修期内，在以下情况下也会收取相关维修费用。

※根据故障或损坏的情况，可能无法修复。

- (a) 因使用错误，非销售方授权单位或人员维修或改装不当而导致的故障或损坏；
- (b) 购买后因自行运输、储存不当等造成的故障或损坏；
- (c) 因火灾、地震、水灾、雷击、冻结、其他自然灾害、污染或电压异常造成的故障或损坏；
- (d) 用于一般家庭用途以外的用途（例如用于商业用途）时的故障或损坏；
- (e) 如果未出示本文件；
- (f) 如果保修卡中未输入购买日期、购买者姓名或购买地点，或者内容被修改。
- (g) 实际报修的产品型号、序列号等相关信息与保修卡不符合

5. 保修服务仅在中国大陆有效。

6. 本保修卡将不予补发，请妥善保管，以免丢失。

关于客户咨询信息

有关维修、处理、保养等的查询，请先联系购买地点

售后电话 400-009-7876

关于个人信息的处置

富技优器健康科技（上海）有限公司可能会将咨询的个人信息和内容用于咨询回复、维修、确认咨询等，并可能保留记录。此外，当我们回拨时，还使用数字显示。您的个人信息将得到妥善管理，除非我们将维修工作进行外包或有其他正当理由，否则不会提供给第三方。如果您有任何问题，请联系我们。

富技优器健康科技（上海）有限公司
FUJI WELLNESS(SHANGHAI)CO.,LTD.

ADD:上海市闵行区申昆路2177号18幢11层1108室

FA300FS Ver1.0