

FUJIIRYŌKI

家庭用

使用说明书

内附保修卡

品名：富士医疗器 薄型靠垫

型号：MC300

- 非常感谢您购买使用本公司产品。
- 使用本产品前请务必仔细阅读说明书，并正确操作使用。
- 此外，该说明书内附保修卡，请阅读后妥善保管。

* 产品设计规格可能会有部分更改，敬请谅解。

目录

	安全注意事项:	1~5
	包装内容及各部件名称:	6
	使用方法:	7~9
	保养及保管方法:	10
	故障排除方法:	11
	产品规格:	12
	保修及售后服务:	13-16



安全注意事项

为了避免对使用者及他人造成危害或发生财产损失，请务必遵守如下说明事项。

图形符号说明

为了防止使用者或他人遭受危害和经济损失，本文中记述了确保安全正确使用的注意事项。



警告

该栏是“设想可能导致死亡或重伤”的内容。



注意

该栏是“设想可能造成受伤或财产损失”的内容。



不得执行的“禁止”内容



必须执行的“强制”内容



警告

关于症状



如您在使用时感觉到身体异常，请立即停止使用并咨询医生。

- 不能表达自己意思或身体无法自主行动的人员及幼儿
- 或者对温度感知能力低的人员
- 服用了安眠药等的人员或者醉酒人员



安全注意事项



下述人员在使用前请务必咨询医生。以免造成事故或损害健康等情形。

- 恶性肿瘤患者
- 心脏病患者
- 怀孕初期不稳定期间或刚生产后的女性
- 因糖尿病等引发的高度末梢循环神经障碍者、知觉障碍者
- 需静养身体的患者
- 脊椎骨折、扭伤、肌肉拉伤等急性疼痛性患者
- 体温超过38°C以上 例如：急性炎症症状（倦怠感、全身发冷、血压变动等）症状严重的人，体力衰弱者
- 使用部位的皮肤出现异常（感染、创伤等）的人员
- 在其他医疗机构接受治疗的患者
- 曾有过低温烫伤经历的人员

使用后皮肤出现发疹、发红、发痒等症状时，请立即停止使用并咨询医生。

如您在使用时感觉到身体异常，请立即停止使用并咨询医生。否则可能会对健康造成损害。

如您在使用本产品后无效果，请咨询医生或专业人士。否则可能会造成事故或对健康造成损害。

关于电池



本产品内嵌充电电池。请勿投入火中、加热、高温、低温下进行充电、使用、放置。否则可能导致发热、失火、破损。



安全注意事项

关于使用



请勿给幼童使用。（有家长、医生以及专家监督的情况除外）否则可能会导致事故或者受伤。
请勿在头部以及面部、黏膜、湿疹、发炎、伤口、皮肤病部位使用。
否则可能会导致事故或者身体不适。
请勿在睡眠时使用。否则可能会导致事故或者身体不适。
请勿在碰撞、扭伤等部位使用。否则可能会导致受伤。
请避免在饮酒、饭后约 30 分钟~1 小时内使用。否则可能会对健康造成损害。
请勿用于治疗外的用途。否则可能会导致事故或者受伤。
请勿与其他治疗仪器同时使用。否则可能会对健康造成损害。
使用于皮肤比较脆弱的部位时请务必小心。请勿连续长时间使用加热模式,否则可能会导致烫伤。

关于“低温烫伤”

即使在温度比较低（40°C~60°C）的情况下，如果长时间接触皮肤的相同部位，在没有感知到发热、疼痛的情况下仍然会有烫伤。请勿长时间接触相同部位。

请勿让仪器接触到水、或用水清洗仪器。否则可能会导致触电、短路、失火、故障等。
使用时请勿强行推压本体。否则可能会导致受伤及破损。
请勿在高温处使用。否则可能会导致失火及发热、烫伤等。



安全注意事项

关于使用（接上页）



在感觉过热时请立即停止使用。

- 在冬季身体寒冷情况使用时，可能会对温度感知敏感。
- 在强力模式下感觉过热时，推荐切换低档模式。

否则可能会导致事故或烫伤。发生故障时，请勿擅自进行修理，而应联系您购买产品的店面或生产销售商。
请务必在阅读使用说明书后正确使用。
请定期检查产品否则可能会导致事故或受伤。

关于充电电源



请勿划伤、损坏、加工、强行弯曲、拉伸、扭动充电线。否则可能会导致短路、故障。
请勿用于电脑、手机等移动电源充电。否则可能会导致短路、故障。
电线或电源插头等损伤、插入插座松动时，请勿使用。否则可能会导致短路、火灾。



安全注意事项



保养本产品时，务必type-c充电线及充电适配器从插座中拔出。另外，拔出type-c充电线时请保持手部干燥。否则可能会导致触电。

拔出电源适配器或者type-c充电线时，请不要强拉电源线，必须抓住充电电源适配器或type-c充电线头部将其拔出。否则可能会导致短路、火灾。

不使用本产品时请将充电电源适配器或type-c线拔出并适当收纳好。否则可能会出现绝缘老化导致的漏电、火灾。

关于异常（故障）



发现故障时请立即停止使用。否则可能会导致事故或受伤。

其他



请勿对本产品自行改造。产品出现故障时，请勿自行修理，请与购买店铺或经销商联络。否则可能会导致火灾、触电、受伤。

🔍 包装内各物品及名称

确认包装内物品

打开包装后, 请在使用前确认包装内是否包含了下述物品。


- 本体
- type-c充电线
- 使用说明书

各部件名称

本体

按摩部
可拆洗

坐部加热

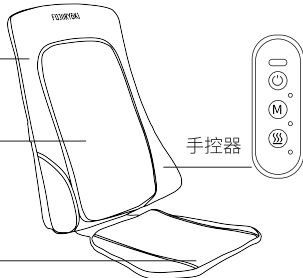

电量显示

- 本产品定时设定为15分钟, 开机15分钟, 本机将自动关机
- 低电量时, 橙灯闪烁
- 充电时闪绿灯, 充满后绿灯长

注: 橙灯闪烁10s后, 产品自动关闭电源。



使用方法

整机功能说明

长按“电源键”，产品进入开机状态，按摩头上下来回转动，默认开启全部加热（加热灯全亮），加热开关通过加热按键单独控制。

开启默认全背（绿灯）

短按切换 下背（快闪橙色）

短按 切换上背（慢闪橙色）

长按关机。（灭灯）

开机默认加热全开（电源按键和模式按键对应亮灯）。

短按1次

按摩头加热

（慢闪橙色灯）

短按1次切换

坐部单独加热

（快闪橙色灯）

短按一次

加热全关

（灭灯）

单独加热模式

按摩模式下长按2s进入 按摩头和坐部同步加热（橙色常亮）

默认快档速度。（绿）

短按 慢档（蓝）

快→慢→快.....



使用方法・注意事项



请勿在浴室等湿气重的场所使用。也不要让水等液体与产品接触。

否则可能会导致触电和故障。

请勿站立或坐在本体上使用。否则可能会导致故障和事故。

请勿过度用力地使身体接触按摩球。否则可能会导致故障、事故和受伤。

请勿对本体强加剧烈冲击。否则可能会导致故障或事故。

请勿将被子或毛毯盖上使用。否则可能会造成本体内部高温。

使用时请勿将按摩球向下放置。否则可能会导致故障。



开始使用时请先在使用位置进行5 分钟较弱的刺激。

刚开始使用时进行过大强度的刺激，可能会对健康造成损害。

感到按摩感过于强烈时，请调整身体与按摩球的接触。

持续进行过强的刺激，可能会对健康造成损害。

请避免在同一部位连续使用。

长时间的连续使用，反而会过度刺激，造成反效果和受伤。

使用时若对产品施加过大的负荷，保护装置会自动运行，产品停止运作。

若产品停止运行，请让本体稍作休息（约1 小时）后再重新启动。

具有加热功能，不能承受过高热度的人员在使用时请务必小心。



使用方法 • 注意事项



注意 使用前的注意事项

- 使用前请先确认按摩部位是否存在布套破损。如有破损请勿使用。


使用前请先确认开关、定时是否正常工作。
长时间未使用的情况下，请再次阅读说明书，
并确认产品是否正常且安全运作。

放在柔软的床或沙发上使用时，可能会感觉力度较弱。
使用时若对产品施加过大的负荷，保护装置会自动运行，
产品停止运作。

若产品停止运行，请让本体稍作休息（约1 小时）
后再重新启动。

*体重大量施加在本体上的姿势可能会令本体停止工作，请不要采取这样的姿势。

请确认按摩部位是
否存在布套破损。

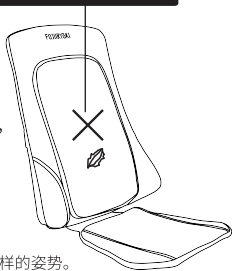



保养方法・保管方法

布套轻微脏污清洁

- 请使用柔软的布料进行干擦。
- 布套的脏污，请用温水稀释中性清洗剂后，浸入柔软布料，拧干后擦拭，最后擦干。
(※布套无法取下)
- 为防止变色，请勿使用稀释剂、含油等溶剂。
- 外套的脏污，请按照下述要领取下外套，按照外套的洗涤图进行洗涤。

可拆洗布套的洗涤

- ① 打开布套的拉链。
- ② 将可拆洗布套进行清洗。
- ③ 抚平褶皱,整理好形状,于阴凉处晾干。

布套安装及保存方法

※请按照取下外套的方法反向操作，安装好外套。

布套安装及保存方法

- 请在去除污渍和灰尘后保存在干燥的地方。
- 长时间不使用时，请盖上布套，收纳在不容易沾染灰尘的地方。
- 请保管在幼儿和儿童无法取到的地方。
- 废弃时，请根据各地相关垃圾处理规定进行处理。
- 电源线等请捋顺后保管。



故障排除方法

在送修前请再次阅读本说明书进行检查，如果还不能解决问题，请联系店铺进行修理。
请勿自行拆卸、修理改造，否则可能引发事故导致受伤。

无法工作	type-c充电线是否连接，本产品出于安全考虑,设定不能在充电时使用，请拔出type-c线后重新开机。
	开关是否正常工作？
产品在运行时停止工作	是否对产品施加了过大的负荷？ 可能是触发了保护装置导致马达停止运转。 请先让产品休息片刻(约1小时)后，再次启动确认。
	开关键按下约 15 分钟后，安全定时功能启动，产品自动停止。这并非故障。 只要按下开关键，就能再次运作。
异音或声音很大	按摩振动音・马达声是产品构造上产生的，并非异常现象。

产品规格

产品名称	富士医疗器 薄型靠垫
型号	MC300
电源输入电压	INPUT: 100-240 V~ 50-60Hz 5V 2A
额定电功率	30w
定时	15MIN
尺寸	(约) 518mm * 407mm * 123mm
产品重量	约2.3kg
电池规格	11.1v 2200mah
材料	本体: ABS 树脂 聚氨酯泡沫 布套: 聚酯纤维 聚酯胺纤维等
转速	强档 约27转 弱档 约20转
生产国	中国
销售商	富技优器医疗健康科技(上海)有限公司

保修和售后服务

维修、处理、保养等咨询

有关维修、处理、保养等方面的相关查询，请先联系购买地点。

● 保修卡 **免费保修：1 年**

请在购买时从购买地点领取保修卡，检查“购买日期”和“产品名”栏中的条目并仔细阅读内容，妥善保管。
如果保修卡上未注明购买日期和购买地点，请联系购买地点或附上能够证明购买日期和购买地点的文件，
例如送货单或收据，并将其妥善保管。

关于保修

请查看使用说明书故障排除方法页内容，如有异常，请停止使用并联系购买地点。

- 如果您想在保修期内要求维修，请咨询购买地点。我们将根据保修卡上的内容进行维修。
(请注意，即使在保修期内也可能会向您收费，因此请仔细阅读保修卡。)
- 如果您想在保修期后要求维修，请先咨询购买地点。如果产品功能可以通过维修来维持，我们将根据您的要求进行收费维修。
- 有关售后服务的其他查询或有任何疑问，请联系您的供应商或我们的客户服务人员。

保修卡

产 品 名			
保 修 期 间		自购买时间开始1年内	保 修 对 象
购 买 日 期		年 月 日	序 列 号 码
购 买 信 息	姓 名		
	地 址		
购 买 地 址		电 话	

※购买产品时，请确保保修卡上写有购买日期和购买地点。如果未列出，请联系购买地点，或附上显示购买日期和购买地点的文件，例如送货单或收据，并将其保存在安全的地方。

※请注意，填写内容后的保修卡内容可用于保修期内的服务活动和随后的检查活动。

※本保修承诺在本文档规定的期限和条件下免费维修。因此，本保修不限制客户对发布保修的人（保修责任人）和其他业务的合法权利。

免费维修政策（节选）

有关保修范围和耗材的更多信息，请查看官方网站或咨询售后客户电话。

1.如果在保修期内按照使用说明书、主机贴标等使用条件发生故障，我们将免费维修。

1) 如果您想申请免费维修，请联系购买地点。

2) 如果您无法从购买地点申请免费维修，请咨询使用说明书中描述的售后电话。

2.在搬家的情况下，请咨询购买地或使用说明书中列出的客户服务台以提出维修请求。

3.如果您因礼物等原因无法向本保修中列出的供应商请求维修，请咨询使用说明书中描述的售后电话。

4.即使在保修期内，在以下情况下也会收取维修费用。

※根据故障或损坏的情况，可能无法修复。

(a) 因使用错误，非销售方授权单位或人员维修或改装不当而导致的故障或损坏；

(b) 购买后因自行运输、储存不当等造成的故障或损坏；

(c) 因火灾、地震、水灾、雷击、冻结、其他自然灾害、污染或电压异常造成的故障或损坏；

(d) 用于一般家庭用途以外的用途（例如，用于商业用途）时的故障或损坏；

(e) 如果未出示本文件；

(f) 如果保修卡中未输入购买日期、购买者姓名或购买地点，或者单词和短语已被重写。

(g) 实际报修的产品型号、序列号等相关信息与保修卡不符合

5. 保修服务仅在中国有效。

6. 本保修卡将不予补发，请妥善保管，以免丢失。

关于客户咨询台的信息

有关维修、处理、保养等的查询，请先联系购买地点

售后电话 400-009-7876

关于个人信息处理

富技优器医疗健康科技（上海）有限公司可能会将咨询的个人信息和内容用于咨询回复、维修、确认咨询等，并可能保留记录。此外，当我们回拨时，还使用数字显示。此外，个人信息将得到妥善管理，除非将维修工作外包或有正当理由，否则不会提供给第三方。如果您有任何问题，请联系您咨询的人。

富技优器医疗健康科技（上海）有限公司

FUJI WELLNESS(SHANGHAI)CO.,LTD.

ADD:上海市闵行区申昆路2177号18幢11层1108室

2024年04月23日（第一版）