

品名： L型腿部按摩器

型号： LA-C001F

- 非常感谢您购买使用本公司产品。
- 使用本产品前请务必仔细阅读使用说明书，并正确操作使用。
- 此外，该说明书内附保修卡，请阅读后妥善保管。

* 产品设计规格可能会有部分更改，敬请谅解。

目录

⚠	安全注意事项	1~6
🔍	包装内容及各部件名称	7
👤	使用方法	8~11
🛠	保养及保管方法	12
🗑	故障排除方法	13
⚙	产品规格	14
💖	保修及售后服务	15~18


安全注意事项

为了避免对使用者及他人造成危害或发生财产损失，请务必遵守如下说明事项。

图形符号说明 为了防止使用者或他人遭受危害和经济损失，本文中记述了确保安全正确使用的注意事项。




该栏是“设想可能导致死亡或重伤”的内容。

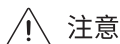

该栏是“设想可能造成受伤或财产损失”的内容。

 不得执行的“禁止”内容  必须执行的“强制”内容

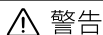

本产品不打算由存在肢体、感官或精神能力缺陷或缺少使用经验和知识的人(包括儿童)使用，除非有负责他们安全的人对他们进行产品使用有关的监督或指导。

应照看好儿童，确保他们不玩耍本产品。

本产品有发热表面，对热不敏感的人使用时必须注意。

本产品应使用标记在器具上的安全特低电压供电(充电电压、电流不超过5V = 1A。

本产品包含不可更换的电池。

安全注意事项

关于症状



下述人员禁止使用，
以免造成事故或损害健康等情形。

- 不能表达自己意思或身体无法自主行动的人员
- 对温度感知能力低的人员
- 服用了安眠药等的人员或者醉酒人员



下述人员在使用前请务必咨询医生，以免造成事故
或损害健康等情形。

- 恶性肿瘤患者 · 心脏病患者 · 静脉曲张患者 · 血栓患者
- 怀孕初期不稳定期间或刚生产后的女性
- 因糖尿病等引发的高度末梢循环神经障碍者、知觉障碍者
- 需静养身体的患者
- 脊椎骨折、扭伤、肌肉拉伤等急性疼痛性患者
- 体温超过38°C以上 例如：急性炎症症状（倦怠感、全身发冷、
血压变动等）症状严重的人，体力衰弱者
- 使用部位的皮肤出现异常（感染、创伤等）的人员
- 在其他医疗机构接受治疗的患者
- 曾有过低温烫伤经历的人员

使用后皮肤出现发疹、发红、发痒等症状时，
请立即停止使用并咨询医生。

如您在使用时感觉到身体异常，请立即停止使用并咨询医生，
否则可能会对健康造成损害。

如您在使用本产品后无效果，请咨询医生或专业人士，
否则可能会造成事故或对健康造成损害。



安全注意事项

关于电池



本产品包含不可更换的电池。

请勿投入火中、加热、高温、低温下进行充电、使用、放置。否则可能导致发热、失火、破损。

在废弃产品前，必须将电池从产品中取出。

在取出电池时产品必须要断电。


电池应根据各地相关的垃圾处理规定进行安全地处置。

电池拆卸请联系专业人员操作，请勿自行操作，否则可能导致受伤或事故。

产品日常使用，低电量时应及时充电。

若长期未使用，请在3个月内对产品进行充电，激活电池。

否则电池过度放电，可能会缩短电池使用寿命，甚至导致电池无法充电。

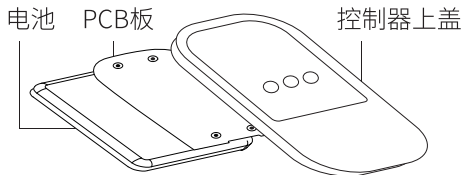

电池拆卸步骤：

1. 取下控制器上盖
2. 取下PCB板螺丝
3. 拔出电池与PCB板连接的端子
4. 小心取出电池



在取出电池时
请先将本体断电



电池请根据
各地相关的
垃圾处理规定
进行处理



安全注意事项

关于使用



请勿给幼童使用，否则可能会导致事故或者受伤。

请勿在头部以及面部、黏膜、湿疹、发炎、伤口、皮肤病部位使用，否则可能会导致事故或者身体不适。

请勿在睡眠时使用，否则可能会导致事故或者身体不适。

请勿在碰撞、扭伤等部位使用，否则可能会导致受伤。

请避免在饮酒、饭后约 30分钟~1小时内使用，否则可能会对健康造成损害。

请勿用于治疗外的用途，否则可能会导致事故或者受伤。

请勿与其他治疗仪器同时使用，否则可能会对健康造成损害。

使用于皮肤比较脆弱的部位时请务必小心，

请勿连续长时间使用加热模式，否则可能会导致烫伤。

产品有发热表面，对热不敏感的人使用时必须注意。

关于“低温烫伤”

即使在温度比较低（40℃~60℃）的情况下，

如果长时间接触皮肤的相同部位，

在没有感知到温度过高或者疼痛的情况下

仍然会有烫伤的风险，请勿长时间在相同部位连续使用。

请勿让产品接触到水或用水清洗仪器，否则可能会导致触电、短路、失火、故障等。

使用时请勿强行推压本体，否则可能会导致受伤及破损。

请勿在高温处使用，否则可能会导致失火及发热、烫伤等。



安全注意事项

关于使用（接上页）

! 在感觉过热时请立即停止使用，否则可能会导致事故或烫伤。

- 在冬季身体寒冷情况下使用时，对温度感知的敏感度可能会降低。
- 在强力模式下感觉温度过高时，推荐切换低档模式使用。

发生故障时，请勿擅自进行修理，而应联系您购买产品的店面或生产销售商。请务必在阅读使用说明书后正确使用。请定期检查产品，否则可能会导致事故或受伤。

关于充电电源

⊘ 请勿划伤、损坏、加工、强行弯曲、拉伸、扭动Type-C充电线，否则可能会导致短路、故障。请勿用电脑等移动电源进行充电，否则可能会导致短路、故障。电线或电源插头等损伤、插入插座松动时，请勿使用，否则可能会导致短路、火灾。



安全注意事项

关于充电电源（接上页）



保养本产品时，务必将Type-C充电线及充电适配器从插座中拔出。

另外，拔出Type-C充电线或充电适配器时请保持手部干燥，否则可能会导致触电。

拔出电源适配器或者Type-C充电线时，请不要强拉电源线，必须抓住充电电源适配器或Type-C充电线头部将其拔出，否则可能会导致短路、火灾。

不使用本产品时请将充电电源适配器或Type-C线拔出并适当收纳好，

否则可能会出现绝缘老化导致的漏电、火灾。

关于异常（故障）



发现故障时请立即停止使用，否则可能会导致事故或受伤。

其他



请勿对本产品自行改造。

产品出现故障时，请勿自行修理。

请与购买店铺或经销商联络，

否则可能会导致火灾、触电、受伤。

🔍 包装内各物品及名称

确认包装内物品


打开包装后，请在使用前确认是否包含了下述物品

- 本体 * 2
- Type-C充电线
- 使用说明书
- 可换洗布(置于产品脚部)

各部件名称

控制器

本体


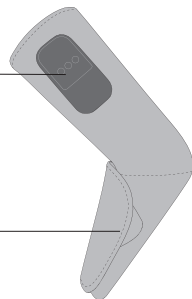


电量显示

- 本产品定时设定为10分钟，
开机10分钟后，
本机将自动关机。
- 满电量时，
电量显示格3格全部亮灯。
电量降低时，电量灯依次灭灯。
- 充电时电量显示格依次闪灯，
充满后全亮灯显示，
随着电量增加，
显示灯依次亮灯。



使用方法

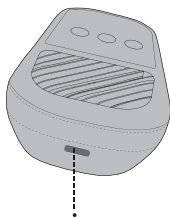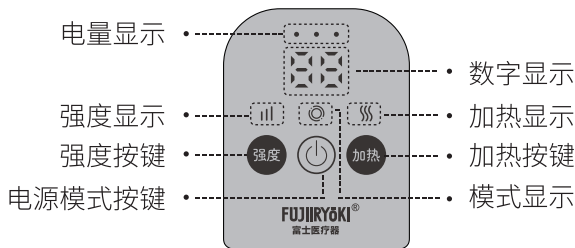

Type-C充电口

控制器面板上由电源模式按键，强度按键和加热按键三个按键构成。

1. 开关机操作

- 开机：长按电源模式按键，产品开机进入工作状态。
- 关机：再次长按电源模式按键，产品关机。

2. 功能操作说明

开机后，短按电源模式、强度、加热按键可切换功能档位。具体如下：

功能	模式档位 显示灯按键	模式档位	档位 显示灯   	数字 显示 	备注
模式 调节	 	腿足放松模式	绿	L1	开机默认 腿足放松 模式
		深揉舒腿模式	蓝	L2	
		足部养生模式	红	L3	
强度 调节	 	弱档	绿	P1	开机默认 弱档
		中档	蓝	P2	
		强档	红	P3	
加热 调节	 	关闭	—	—	开机默认 关闭
		低档	绿	H1	
		中档	蓝	H2	
		高档	红	H3	

3. 充电说明

插入适配器5V  1A，进入充电模式，屏上电量显示指示灯亮并闪烁，充满时电量显示指示灯长亮。充电期间产品无法使用。



请勿在浴室等湿气重的场所使用，
也不要让水等液体与产品接触，
否则可能会导致触电和故障。

请勿站立或坐在本体上使用，否则可能会导致故障和事故。
请勿过度用力使用，否则可能会导致故障、事故和受伤。
请勿对本体强加剧烈冲击，否则可能会导致故障或事故。
请勿将被子或毛毯盖上使用，否则可能会造成本体内部高温。




开始使用时请先在使用位置进行5 分钟较弱的刺激。
刚开始使用时进行过大强度的刺激，可能会对健康造成损害。
感到按摩感过于强烈时，请调整强度。
持续进行过强的刺激，可能会对健康造成损害。
请避免在同一部位连续使用。
长时间的连续使用，反而会过度刺激，造成反效果和受伤。
具有加热功能，不能承受过高热度的人员在使用时请务必小心。



注意 使用前的注意事项

- 使用前请先确认产品布套部位是否存在布套破损，如有破损请勿使用。

请确认按摩部位是否存在布套破损。

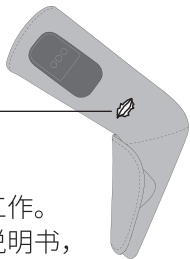

- 使用前请先确认开关、定时是否正常工作。
- 长时间未使用的情况下，请再次阅读说明书，并确认产品是否正常且安全运作。
- 本产品可靠粘毛扣进行强度调节，如果在未绑紧的情况下使用时，可能会感觉力度较弱，请根据个人情况适当调整。
- 初次使用或长期未使用时，设备可能因电量耗尽无法开机，请先充电后再使用。
- 请在脚部干燥时穿戴本产品，以延长换洗布寿命。



保养方法・保管方法

布套轻微脏污清洁

- 请使用柔软的布料进行干擦。
- 布套的脏污，请用温水稀释中性清洗剂后，浸入柔软布料，拧干后擦拭，最后擦干。（※本体布套无法取下）
- 为防止变色，请勿使用稀释剂、含油等溶剂。
- 抚平褶皱，整理好形状，于阴凉处晾干。

保存方法

- 请在去除污渍和灰尘后保存在干燥的地方。
- 长时间不使用时，收纳在不容易沾染灰尘的地方。
- 请保管在幼儿和儿童无法取到的地方。
- 废弃时，请根据各地相关垃圾处理规定进行处理。
- Type-C充电线等请捋顺后保管。

故障排除方法

在送修前请再次阅读本说明书进行检查，如果还不能解决问题，请联系店铺进行修理。

请勿自行拆卸、修理改造，否则可能引发事故导致受伤。

无法工作	Type-C充电线是否连接，本产品出于安全考虑，设定不能在充电时使用，请在电池充满后，拔出Type-C充电线后重新开机。
	开关是否正常工作？
产品在运行时停止工作	开关键按下约10分钟后，安全定时功能启动，产品自动停止。这并非故障。只要按下开关键，就能再次运作。
异音或声音大	产品通过气压进行按摩，气泵和气阀动作音是产品构造上产生的，并非异常现象。

产品规格

产品名称	L型腿部按摩器
产品型号	LA-C001F
额定电压 (充电电压)	5V ---
额定功率 (充电功率)	5W
工作电压	3.7V ---
工作功率	8W
电池规格	3.7V --- , 2500mAh, 9.25Wh
产品定时	10分钟
产品尺寸	(约)350mm*200mm*100mm*2(完全收纳状态)
产品重量	(约)560g*2
材料	控制器：ABS树脂 EVA等 布 套：聚酯纤维 聚酯胺纤维等
温度	(约)43°C/46°C/49°C
原产地	中国
执行标准	GB/T 4706.1-2024 GB/T 4706.10-2024
制造商	富技优器健康科技（上海）有限公司

维修、处理、保养等咨询

有关维修、处理、保养等方面的相关查询，请先联系购买地点。

保修卡 免费保修 1年

请在购买时从购买地点领取保修卡，检查“购买日期”和“产品名”栏中的条目并仔细阅读内容，妥善保管。如果保修卡上未注明购买日期和购买地点，请联系购买地点或附上能够证明购买日期和购买地点的文件。例如送货单或收据，并将其妥善保管。

关于保修

请查看使用说明书故障排除方法页面内容，如有异常，请停止使用并联系购买地点。

- 如果您想在保修期内要求维修，请咨询购买地点，我们将根据保修卡上的内容进行维修。
(请注意，即使在保修期内也可能会向您收费，因此请仔细阅读保修卡。)
- 如果您想在保修期后要求维修，请先咨询购买地点。如果产品功能可以通过维修来维持。我们将根据您的需求进行收费维修。
- 有关售后服务的其他查询或有任何疑问，请联系您的供应商或我们的客户服务人员。

保修卡

产 品 名		
保修期间		自购买时间开始1年内
保修对象		本体(耗材包材除外)
序列号码		
购买日期		年 月 日
购买信息	姓名	
	地址	
	电话	
购买地址		

- ※购买产品时，请确保保修卡上写有购买日期和购买地点。
如果未列出，请联系购买地点，或附上显示购买日期和购买地点的文件，例如送货单或收据，并将其保存在安全的地方。
- ※请注意，填写内容后的保修卡内容可用于保修期内的服务活动和随后的检查活动。
- ※本保修承诺在本文档规定的期限和条件下免费维修。
因此，本保修不限制客户对发布保修的人（保修责任人）和其他业务的合法权利。

免费维修政策（节选）

有关保修范围和耗材的更多信息，
请查看官方网站或咨询售后客服电话。

- 1.如果在保修期内按照使用说明书、
主机贴标等使用条件发生故障，我们将免费维修。
 - (a) 如果您想申请免费维修，请联系购买地点。
 - (b) 如果您无法从购买地点申请免费维修，
请咨询使用说明书中描述的售后电话。
- 2.在搬家的情况下，请咨询购买地或使用说明书中列出的
客户服务台以提出维修请求。
- 3.如果您因如果您通过礼品等方式获得产品，无法向本保修卡
所列供应商请求维修，请咨询使用说明书中描述的售后电话。
- 4.即使在保修期内，在以下情况下也会收取相关维修费用。
※根据故障或损坏的情况，可能无法修复。
 - (a) 因使用错误，非销售方授权单位或人员维修或改装不当而
导致的故障或损坏；
 - (b) 购买后因自行运输、储存不当等造成的故障或损坏；
 - (c) 因火灾、地震、水灾、雷击、冻结、其他自然灾害、
污染或电压异常造成的故障或损坏；
 - (d) 用于一般家庭用途以外的用途（例如用于商业用途）时的
故障或损坏；
 - (e) 如果未出示本文件；
 - (f) 如果保修卡中未输入购买日期、购买者姓名或购买地点，
或者内容被修改。
 - (g) 实际报修的产品型号、序列号等相关信息与保修卡不符合
5. 保修服务仅在中国大陆有效。
6. 本保修卡将不予补发，请妥善保管，以免丢失。

关于客户咨询信息

有关维修、处理、保养等的查询，请先联系购买地点

售后电话 400-009-7876

关于个人信息的处置

富技优器健康科技（上海）有限公司可能会将咨询的个人信息和内容用于咨询回复、维修、确认咨询等，并可能保留记录。此外，当我们回拨时，还使用数字显示。您的个人信息将得到妥善管理，除非我们将维修工作进行外包或有其他正当理由，否则不会提供给第三方。如果您有任何问题，请联系我们。

富技优器健康科技（上海）有限公司
FUJI WELLNESS(SHANGHAI)CO.,LTD.

ADD:
上海市闵行区申昆路2177号
18幢11层1108室